

seca 207

Deutsch	Seite 3
Englisch	Page 5
Français	Page 7
Español	Página 9
Italiano	Pagina 11
Dansk	Side 13
Svenska	Sida 15
Norsk	Side 17
Suomi	Sivu 19
Nederlands	Pagina 21
Português	Página 23
Ελληνικά	Σελίδα 25
日本語	27
Polski	Strona 29

Herzlichen Glückwunsch

Mit dem Messstab seca 207 haben Sie ein präzises und gleichzeitig robustes Längenmessgerät für Säuglinge erworben.

Der Säulingsmessstab seca 207 dient sowohl der Feststellung der Geburtsgröße eines Neugeborenen als auch der Kontrolle der Körperlänge im Wachstumsprozess.

Er ist aus stabilem und pflegeleichten Aluprofil gefertigt.

Die Messschieberzungen aus Kunststoff sind klappbar – somit kann der Messstab platzsparend gelagert werden.

Falls eine Wandbefestigung gewünscht ist, verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Abstandshalter.

Der Messstab kann so waagrecht z.B. über dem Wickeltisch befestigt werden und dient dort als stationäre Messeinrichtung.

Zum Einsatz kommt der Messstab seca 207 in Krankenhäusern und Arztpraxen.

Sicherheit

Bevor Sie den neuen Messstab benutzen, nehmen Sie sich bitte ein wenig Zeit, um die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen.

- Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung.
- Lassen Sie den Säugling niemals unbeaufsichtigt mit dem Messstab liegen, da sonst eine Verletzungsgefahr besteht.
- Führen Sie die Längenmessung nur auf Unterlagen aus, von denen der Säugling nicht herunter fallen kann.

- Achten Sie darauf, dass der Messstab regelmäßig gereinigt und desinfiziert wird, um eine Übertragung von ansteckenden Krankheiten zu vermeiden.
- Für eine exakte Längenmessung wird idealerweise eine zweite Person benötigt.

Bedienung



Messvorgang:

1. Den Säugling auf eine flache Unterlage legen. Den Messstab mit der Messschieberzunge (1) an den Kopf des Säuglings legen
2. Mit der rechten Hand den Messschieber (2) in Richtung der Füße des Säuglings schieben. Die linke Hand fixiert den Säugling.
3. Die Beine strecken, indem die linke Hand vorsichtig die Knie des Säuglings leicht zur Unterlage drückt.

4. Mit der rechten Hand den Messschieber (2) rechtwinkelig an die Fußsohlen des Kindes anlegen.
5. Ablesen der Körperlänge an der Markierung auf der Innenseite des Messstabes (3). Bei Einhaltung der oben genannten Schritte wird eine Genauigkeit besser ± 10 mm erreicht.

Messzungenverbreiterung befestigen...

- Sie haben die Möglichkeit die Kopfauffläche zu vergrößern.
- Drücken Sie die Messzungenverbreiterung von oben auf die Messzunge, so dass sie spürbar einrastet. Die Verbreiterung ist dann mit geringem Kraftaufwand auf der Messzunge verschiebbar.

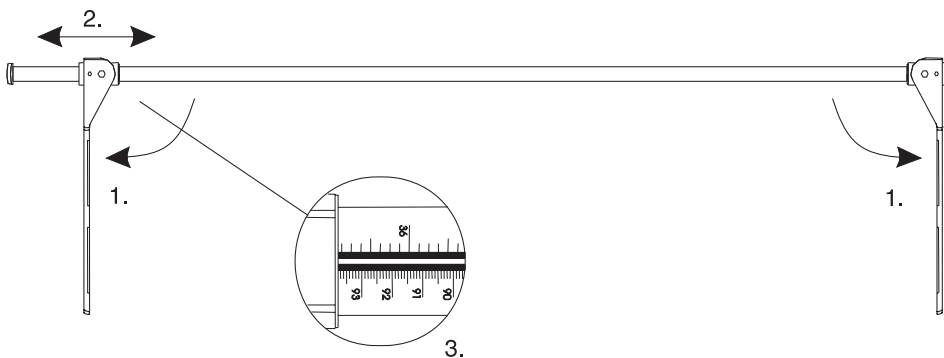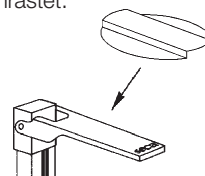

Reinigung

Reinigen Sie den Messstab nach Bedarf mit einem Haushaltsreiniger oder handelsüblichen Desinfektionsmittel. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers.

Technische Daten

Messbereich	0 - 990 mm / 0 - 39 inch
Teilung	1mm / 1/8 inch
Genauigkeit:	besser als ± 10 mm
Abmessungen (B x H x T)	55 mm x 1050 mm x 34 mm
Eigengewicht	ca. 700 g
Temperaturbereich	+10° C bis +40° C
Medizinprodukt nach Richtlinie 93/42/EWG	Klasse I mit Messfunktion

Entsorgung

Sollte der Messstab nicht mehr benutzt werden können, gibt Ihnen der zuständige Müllbeseitigungsverband gern Auskunft über notwendige Maßnahmen zur fachgerechten Entsorgung.

Gewährleistung

Für Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, gilt eine zweijährige Gewährleistungsfrist ab Lieferung. Alle beweglichen Teile, wie z.B. Batterien, Kabel, Netzgeräte, Akkus etc., sind hiervon ausgenommen. Mängel, die unter die Gewährleistung fallen, werden für den Kunden gegen Vorlage der Kaufquittung kostenlos behoben. Weitere Ansprüche können nicht berücksichtigt werden. Kosten für Hin- und Rücktransporte gehen zu Lasten des Kunden, wenn sich das Gerät an einem anderen Ort als dem Sitz des Kunden befindet. Bei Transportschäden können Gewährleistungsansprüche nur geltend gemacht werden, wenn für Transporte die komplette Originalverpackung verwendet und die Ware darin gemäß dem originalverpackten Zustand gesichert und befestigt wurde. Bewahren Sie daher alle Verpackungsteile auf.

Es besteht keine Gewährleistung, wenn das Gerät durch Personen geöffnet wird, die hierzu nicht ausdrücklich von seca autorisiert worden sind.

Kunden im Ausland bitten wir, sich im Gewährleistungsfall direkt an den Verkäufer des jeweiligen Landes zu wenden.



Konformitätserklärung

Mechanisches Längenmessgerät

Modell seca 207

Chargennr.: siehe Rückseite Messstab

Der Messstab erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

Hamburg, May 2015

Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
i: www.seca.com

Congratulations!

In the seca 207 measuring rod, you have acquired an accurate and at the same time sturdy piece of equipment for measuring the length of babies.

The measuring rod serves both to determine the length at birth of a newborn and to check body length during the growth process. It is made of rigid, easy-care aluminium profile. The plastic measuring slides can be folded, so the measuring rod does not take up much space in storage.

If you want to attach it to the wall, use the screws and spacers supplied.

The measuring rod can thus be attached horizontally over the changing table, for example, and be used as a stationary measuring device. The seca 207 measuring rod is used in hospitals and doctors' surgeries.

Safety

Before using the new measuring rod, please take a little time to read the following safety instructions:

- Follow the operating instructions.
- Never leave the baby lying unsupervised with the measuring rod, otherwise there is a risk of injury.
- Only measure length on surfaces from which the baby cannot fall.
- Ensure that the measuring rod and scale are cleaned and disinfected regularly to prevent infectious diseases being transmitted.

- A second person is ideally required to enable length to be measured exactly.

Operation



Measurement process:

1. Place the baby on a flat surface. Position the measuring rod with the measuring slide (1) at the baby's head.
2. Using your right hand, slide the measuring slide (2) in the direction of the baby's feet. The left hand holds the baby steady.
3. Stretch the baby's legs, using the left hand to push the baby's knees carefully and gently down onto the surface.
4. Use your right hand to place the measuring slide (2) at right angles to the soles of the baby's feet.

5. Read off body length on the marking on the inside of the measuring rod (3).
If the above-mentioned instructions are followed, accuracy greater than ± 10 mm can be achieved.

Attaching the measuring tongue extension...

- There is provision for enlarging the head support surface.
- Press the measuring tongue extension onto the measuring tongue from above so that it locks audibly in position. The extension can then be moved on the measuring tongue with little effort.

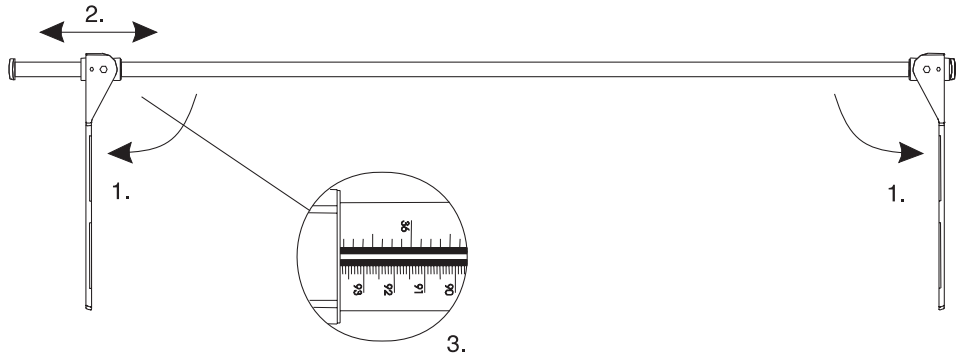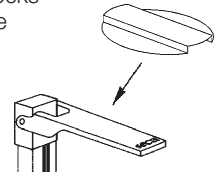

Cleaning

Clean the measuring rod as required using a domestic cleaning agent or commercially-available disinfectant. Follow the manufacturer's instructions.

Technical data

Measurement range: 0-990 mm /
0-39 inches
Graduations: 1 mm / 1/8 inch
Accuracy: greater than ± 10 mm
Dimensions (W x H x D): 55 mm x 1050 mm x
34 mm
Weight: approx. 700 g
Temperature range: +10 °C to +40 °C
Medical product in
accordance with
Directive 93/42/EEC: Class I with measuring
function

Disposal

Should the measuring rod no longer be able to be used, the responsible waste disposal association will be glad to give you information about the measures necessary to dispose of it properly.

Warranty

A two-year warranty from date of delivery applies to defects attributable to poor materials or workmanship. All moveable parts – batteries, cables, mains units, rechargeable batteries etc. – are excluded. Defects which come under warranty will be made good for the customer at no charge on production of the receipt. No further claims can be entertained. The costs of transport in both directions will be borne by the customer should the equipment be located anywhere other than the customer's premises. In the event of transport damage, claims under warranty can be honoured only if the complete original packaging was used for any transport and the merchandise secured and attached in that packaging just as it was when originally packed. All the packaging should therefore be retained.

A claim under warranty will not be honoured if the equipment is opened by persons not expressly authorised by seca to do so.

We would ask our customers abroad to contact their local sales agent in the event of a warranty matter.



Declaration of conformity

Mechanical equipment for measuring length

seca model 207

Batch no.: see back of measuring rod

The measuring rod meets the applicable requirements of Directive 93/42/EEC on medical products.

Hamburg, May 2015

Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
i: www.seca.com

Félicitations !

En achetant la toise de mesure seca 207, vous avez acquis un appareil de mesure pour les nourrissons à la fois précis et robuste.

La toise de mesure permet tant de mesurer la taille d'un nouveau-né à la naissance que de la contrôler au cours de la croissance.

Elle est fabriquée en profilé aluminium rigide et ne requiert aucun entretien.

Les languettes de mesure coulissantes en plastique peuvent être rabattues pour permettre un rangement pratique de la règle graduée.

Des vis et une pièce d'écartement fournies permettent de fixer la règle au mur.

La règle graduée peut ainsi être installée verticalement au-dessus d'une table de soins pour faire office de dispositif de mesure fixe.

La règle graduée seca 207 est destinée principalement aux hôpitaux et cabinets médicaux.

- Pour effectuer la mesure exacte de la taille, l'aide d'une deuxième personne est recommandée.

Utilisation


Comment mesurer correctement :

1. Poser le nourrisson sur une surface plane. Poser la toise en poussant le curseur (1) sur la tête du nourrisson.
2. Avec la main droite, faire glisser le curseur (2) en direction des pieds du nourrisson. Maintenir le nourrisson en place avec la main gauche.
3. Tendre les jambes en poussant délicatement sur les genoux du nourrisson avec la main gauche.
4. Avec la main droite, pousser le curseur (2) contre la plante des pieds du nourrisson.

5. Lire la taille sur la graduation sur le côté interne de la toise de mesure (3). En respectant les étapes ci-dessus, on obtient une précision de mesure d'environ ± 10 mm.

Fixer la rallonge de languette métrique...


- Vous avez la possibilité d'agrandir la surface de contact de la tête.
- Appuyer la rallonge à partir du haut sur la languette métrique jusqu'au déclic. La rallonge se déplace sans effort sur la languette métrique.

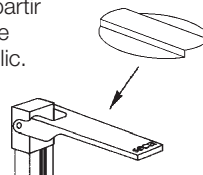

Sécurité

Avant d'utiliser la nouvelle toise de mesure, prenez le temps de lire les consignes de sécurité suivantes.

- Veuillez respecter les instructions du mode d'emploi.
- Ne laissez jamais le nourrisson sans surveillance sur la toise de mesure afin d'éviter tout danger.
- N'effectuez la mesure que sur des surfaces desquelles le nourrisson ne peut tomber.
- Veillez à ce que la toise de mesure et le pèse-bébé soient régulièrement nettoyés et désinfectés, afin d'éviter toute transmission de maladie contagieuse.

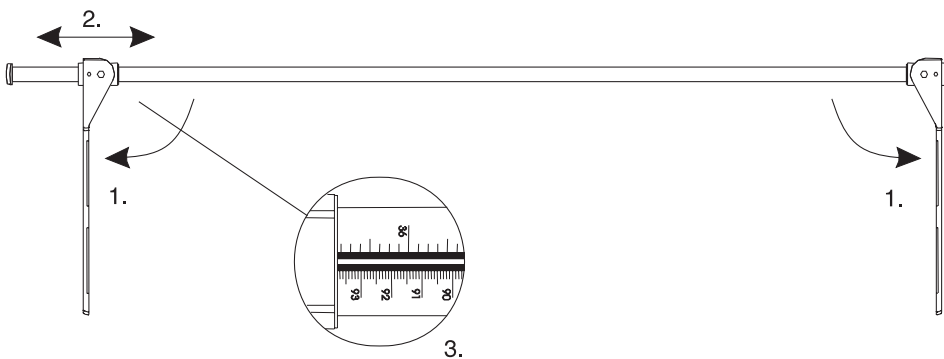

Nettoyage

Nettoyez la toise de mesure si nécessaire avec un nettoyant ménager ou un désinfectant courant. Veuillez respecter les instructions du fabricant.

Données techniques

Plage de mesure:	0-990 mm / 0-39 pouces
Graduation:	1 mm / 1/8 pouce
Précision:	supérieure à ± 10 mm
Dimensions (L x H x Pr.):	55 mm x 1050 mm x 34 mm
Poids:	environ 700 g
Limites de température:	+10 °C à +40°C
Produit médical en vertu de la directive 93/42/CEE:	Classe I avec fonction de mesure

Élimination

Si la toise de mesure ne peut plus être utilisée, l'organisme d'enlèvement des déchets pourra vous renseigner sur les mesures nécessaires à prendre pour une élimination appropriée.

Garantie

Une garantie de deux ans à compter de la date de livraison est accordée pour les défauts de matière et de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces amovibles, telles que les batteries, les câbles, les adaptateurs secteur, les accumulateurs etc. Les défauts couverts par la garantie sont réparés gratuitement sur présentation de la quittance d'achat par le client. Aucune autre demande de réparation ne peut être prise en compte. Les frais de transport sont à la charge du client si l'appareil n'est pas installé à la même adresse que celle du client. En cas d'endommagements dus au transport, le cas de garantie peut être invoqué uniquement si l'emballage d'origine complet a été utilisé pour les transports et si la marchandise a été immobilisée et fixée conformément à l'emballage initial. Tous les éléments de l'emballage doivent par conséquent être conservés.

Aucun cas de garantie ne peut être invoqué si l'appareil est ouvert par des personnes qui ne sont pas explicitement autorisées par seca.

Nous prions nos clients à l'étranger de bien vouloir contacter directement le revendeur de leur pays respectif pour les cas de garantie.



Certificat de conformité

Appareil de mesure à fonctionnement
mécanique

Modèle seca 207

Lot n°: voir au dos de la toise de mesure

La toise de mesure satisfait aux exigences de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Hamburg, May 2015

Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
①: www.seca.com

¡Le felicitamos!

Con la compra de la varilla de medición seca 207 ha adquirido Ud. un aparato de medición para bebés robusto y de gran precisión.

La varilla de medición sirve tanto para determinar la altura del recién nacido como también para controlar la altura durante el proceso de crecimiento.

Fabricada de perfil de aluminio robusto y de fácil limpieza. Las correderas de medición son de plástico y abatibles - de este modo se puede guardar la varilla economizando espacio.

En caso de desearse una fijación mural, utilice los tornillos y distanciadores suministrados.

La varilla puede sujetarse horizontal p.ej. sobre la mesa de cambiar pañales, sirviendo así como dispositivo de medición estacionario.

La varilla de medición seca 207 encuentra aplicación en hospitales y consultorios médicos.

Seguridad

Antes de proceder al uso de la nueva varilla de medición, rogamos sirva tomarse un poco de tiempo para leer las siguientes notas sobre la seguridad.


- Sírvase observar las notas y advertencias expuestas en las instrucciones de servicio.
- No dejar nunca al bebé con la varilla sin vigilancia, pues existe el riesgo de que se lesione.
- Realizar las mediciones sólo sobre bases de las que no pueda caerse el bebé.

- Cuidar de que la varilla de medición y la báscula se limpien y desinfecten periódicamente, para evitar posibles contagios de enfermedades.
- Para una medición ideal y exacta se necesita la ayuda de una segunda persona.

Manejo

Medición:


1. Colocar el bebé sobre una base plana.
Poner la reglilla (1) de la varilla de medición en la cabeza del bebé.
2. Desplazar la corredera (2) con la mano derecha hacia los pies del bebé. Sujetar al bebé con la mano izquierda.
3. Estirar las piernas del bebé, apretando ligeramente las rodillas de éste con la mano izquierda.

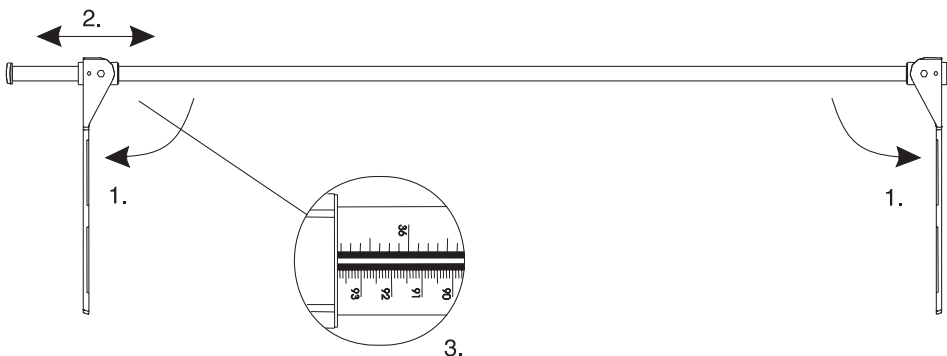

4. Colocar la corredera (2) en ángulo recto a las plantas de los pies del bebé con la mano derecha.
5. Leer la longitud del bebé en la marca, que se encuentra en la parte interior de la varilla de medición (3)
Manteniendo los pasos arriba indicados, se logra una exactitud de ± 10 mm.

Afianzar la lengüeta supletoria de anchura para medición...

- Se tiene la posibilidad de ampliar el plano de apoyo sobre la cabeza.
- Presionar desde la parte superior la lengüeta supletoria de anchura sobre la lengüeta de medición de forma que ésta encaje sobre la primera. El suplemento de anchura puede, entonces, correr por la lengüeta de medición sin necesidad de aplicar demasiada fuerza.

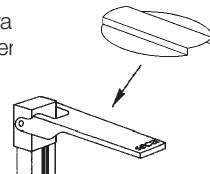

Limpieza

Limpiar la varilla de medición, según fuera preciso, con un detergente doméstico o con un desinfectante corriente. Seguir los avisos del fabricante.

Datos técnicos

Rango de medición:	0-990 mm / 0-39 pulgadas
Graduación:	1 mm / 1/8 de pulgada
Precisión:	mejor de ± 10 mm
Dimensiones (An. x Al. x P):	55 mm x 1050 mm x 34 mm
Peso propio:	aprox. 700 g.
Rango de temperatura:	+10°C hasta +40°C
Producto médico- sanitario conforme a la directiva 93/42/CE:	Clase I con función métrica

Eliminación

Si no se pudiera utilizar más la varilla de medición, la Asociación gestora de residuos pertinente le informará con gusto sobre las medidas necesarias a llevar a cabo para una eliminación adecuada.

Garantía

Garantizamos 2 años de garantía a partir de la fecha de entrega por los fallos debidos a fallos de material o de fabricación. Se excluyen todas las piezas móviles como p. ej. pilas, cables, equipos de alimentación, acumuladores, etc. Los fallos que recaigan durante el período de garantía se subsanarán gratis presentando el recibo de compra. Otros derechos no pueden tenerse en consideración. El transporte de ida y vuelta corre a cargo del cliente, si el aparato se encuentra en otro lugar de la sede del cliente. Sólo se concederán derechos de garantía en casos de daños de transporte, si en el transporte se usó el embalaje original y la mercancía se aseguró y sujetó tal como en su estado original. Por lo tanto, conserve todas las piezas de embalaje.

La garantía caduca si el aparato es abierto por personas que no han sido autorizadas expresamente para ello por seca.

Rogamos a los clientes extranjeros que se dirijan ante un caso de garantía al vendedor del país respectivo.



Declaración de conformidad

Equipo mecánico para medición
longitudinal

Modelo seca 207

Nº de carga: véase lado trasero de la varilla

La varilla de medición cumple las exigencias legales de la directriz 93/42/CEE sobre productos médicos.

Hamburg, May 2015

Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
①: www.seca.com

Congratulazioni vivissime

Con l'asta graduata seca 207 avete acquistato uno strumento per la misura della statura (statimetro) di lattanti preciso e contemporaneamente robusto.

L'asta graduata ha il compito sia di stabilire la statura di un neonato al momento della nascita, che di controllarla durante il processo di crescita.

Esso è fabbricato in profilato di alluminio pratico. Le squadrette scorrevoli di misura in plastica sono ripiegabili, in questo modo risulta possibile riporre l'asta di misura con un ingombro minimo. Se si desidera il fissaggio alla parete, utilizzate le viti ed i distanziatori compresi nella fornitura.

In questo modo si può fissare l'asta di misura in posizione orizzontale sopra il fasciatoio ed in tale posizione serve da dispositivo di misura fisso.

Lo statimetro seca 207 trova il suo impiego in ospedali ed ambulatori medici.

Sicurezza

Prima di utilizzare la nuova asta graduata, prendetevi per favore un po' di tempo, per leggere le seguenti avvertenze riguardanti la sicurezza.

- Attenetevi alle indicazioni nelle istruzioni per l'uso.
- Non lasciate mai il lattante senza sorveglianza sdraiato con l'asta graduata, altrimenti vi è pericolo di lesioni.
- Eseguite la misurazione della statura solo su supporti, dai quali il lattante non può cadere.

- Fate attenzione che l'asta graduata e la bilancia vengano pulite e disinfettate regolarmente, per evitare la trasmissione di malattie contagiose.
- Per una misurazione esatta della statura nel caso ideale occorre una seconda persona.

Uso

Procedimento di misura

1. Mettere il lattante sdraiato su un supporto piano. Accostare l'asta graduata con la linguetta dello scorrevole di misura (1) alla testa del lattante.
2. Con la mano destra spostare lo scorrevole di misura (2) nella direzione dei piedi del lattante. La mano sinistra tiene fermo il lattante.
3. Tendere le gambe, premendo cautamente con la mano sinistra le ginocchia del lattante verso il supporto.
4. Con la mano destra appoggiare lo scorrevole

di misura (2) ad angolo retto alla pianta dei piedi del bebè.

- 5 Leggere la statura sulla marcatura sul lato interno dell'asta graduata (3).



Se ci si attiene alle istruzioni citate, si raggiunge una precisione superiore a ± 10 mm.

Fissare l'estensione del cursore di misura

...

- Avete la possibilità di aumentare la superficie di appoggio sulla testa.
- Esercitate dall'alto una pressione sull'allargamento della linguetta di misura contro il cursore, in modo da farlo agganciare a scatto in modo percettibile.

A questo punto si può fare scorrere l'allargamento sul cursore esercitando un minimo sforzo.

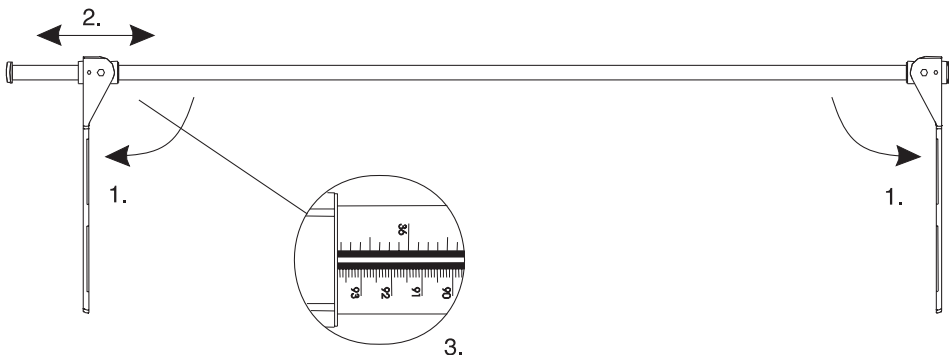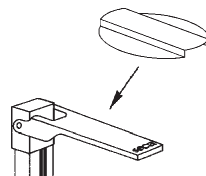

Pulizia

Pulite l'asta graduata, quando se ne presenta la necessità, con un detersivo per usi domestici oppure con un disinfettante normalmente in commercio. Attenetevi alle avvertenze del fabbricante.

Specifiche tecniche

Campo di misura:	0-990 mm / 0-39 pollici
Divisione:	1 mm / 1/8 pollice
Precisione:	superiore a ± 10 mm
Dimensioni (LxAxP):	55 mm x 1050 mm x 34 mm
Peso proprio:	circa 700 g
Campo di temperatura:	+ 10°C fino a + 40 °C
Prodotto medicale conforme alla direttiva 93/42/CEE:	classe I con funzione di misura

Smaltimento

Se l'asta graduata non si dovesse più poter utilizzare, l'ente per l'eliminazione dei rifiuti competente vi darà volentieri le informazioni sui provvedimenti necessari per l'eliminazione a regola d'arte.

Garanzia

Per difetti che si possono ricondurre ad errori di materiale o di fabbricazione vale un termine di garanzia di due anni a partire dalla consegna. Tutte le parti mobili come, ad esempio, batterie, cavi, alimentatori, accumulatori, ecc, ne sono escluse. Difetti che sono coperti dalla garanzia, verranno eliminati gratuitamente per il cliente contro presentazione della ricevuta d'acquisto. Non è possibile prendere in considerazione altre pretese. I costi del trasporto di andata e di ritorno sono a carico del cliente, se l'apparecchio si trova in un luogo diverso dal domicilio del cliente. Nel caso di danni dovuti al trasporto i diritti di garanzia si possono far valere solo se per il trasporto si è utilizzato l'imballaggio originale completo e la merce vi è stata fissata in modo conforme allo stato dell'imballaggio originale. Conservate quindi le parti dell'imballaggio.

Non vi è nessuna garanzia, se l'apparecchio è stato aperto da persone, che non sono state esplicitamente autorizzate a ciò dalla seca.

Preghiamo i clienti all'estero di rivolgersi nei casi previsti dalla garanzia direttamente al venditore del rispettivo Paese.



Dichiarazione di
conformità

Strumento per la misura della statura

Modello seca 207

Lotto N.: vedere lato posteriore del materassino
graduato

Il materassino graduato soddisfa i requisiti
vigenti della direttiva 93/42/CEE su prodotti
medicali.

Hamburg, May 2015

Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
①: www.seca.com

Hjertelig tillykke

Med målepinden seca 207 har De købt et præcist og samtidig holdbart længdemåleapparat til spædbørn.

Målepinden seca 207 er både beregnet til at fastslå et nyfødt barns størrelse og til at føre kontrol med kropslængden i løbet af væksten. Den er fremstillet af stabil aluminiumprofil og er let at holde i stand. Måleglidertungerne af kunststof kan klappes sammen – således kan målestokken opbevares pladsbesparende. Hvis De ønsker en vægbefæstigelse, skal De benytte de medleverede skruer og afstandsholdere.

På den måde kan målestokken placeres vandret f.eks. over puslebordet, hvor den så tjener som stationær måleanordning.

Målestokken seca 207 anvendes på hospitaler og i lægepraksisser.

Sikkerhed

Inden De tager den nye målepind i brug, bedes De bruge lidt tid på at læse de nedenstående sikkerhedshenvisninger igennem.

- Overhold henvisningerne i brugsanvisningen
- Lad aldrig spædbarnet ligge på målepinden uden opsyn, idet der i så fald er fare for kvæstelser.
- Gennemfør altid kun længdemålingen på underlag, som spædbarnet ikke kan falde ned fra.
- Sørg for, at målepinden regelmæssigt bliver rensat og desinficeret for at undgå en overføring af smitsomme sygdomme.

- Det er bedst at være to personer om målingen, for at den kan blive præcis.

Betjening



Måling:

1. Spædbarnet lægges på et fladt underlag. Målepinden lægges op til spædbarnets hoved vha. tungen på måleskyderen (1).
2. Med højre hånd skubbes måleskyderen (2) hen i retning af spædbarnets fødder. Med venstre hånd holdes barnet fast.
3. Stræk benene ved forsigtigt at trykke spædbarnets knæ lidt ned på måttens bund med venstre hånd.
4. Med højre hånd lægges måleskyderen (2) i en ret vinkel mod barnets fodsåler.

5. Aflæs kropslængden på markeringen på indersiden af målepinden (3). Hvis den ovennævnte fremgangsmåde overholdes, opnår man en nøjagtighed, som er bedre end ± 10 mm.

Befæstigelse af måltungeudvidelsen...

- De har mulighed for at gøre hovedstøttefladen større.
- Tryk oppefra måltungeudvidelsen på måletungen, så man kan mærke, den går i indgreb. Udvidelsen kan så let forskydes på måletungen.

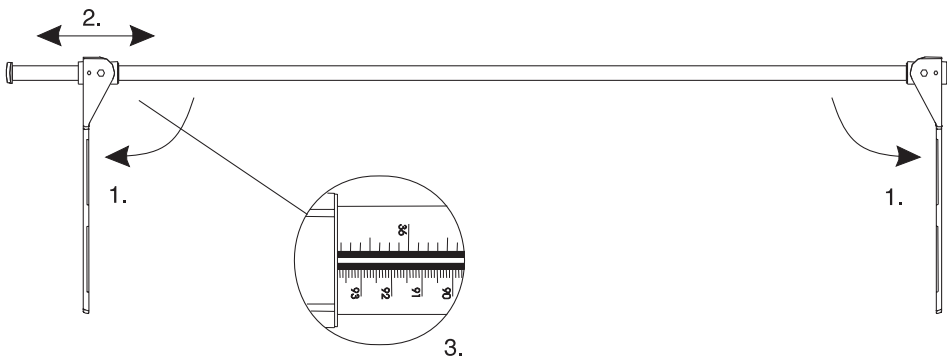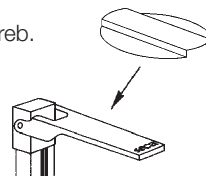

Rengøring

Rengør målepinden efter behov med et hus-holdningsrengøringsmiddel eller et almindeligt desinfektionsmiddel. Overhold producentens henvisninger.

Tekniske data

Måleområde:	0-990 mm / 0-39 inch
Inddeling:	1 mm / 1/8 inch
Nøjagtighed:	bedre end ± 10 mm
Mål (B x H x D):	55 mm x 1050 mm x 34 mm
Egenvægt:	ca. 700 g
Temperatur- område:	+10° C til +40° C
Medicinsk produkt iht. direktiv 93/42/EØF:	Klasse I med målefunktion

Bortskaffelse

Når målepinden en gang ikke kan bruges mere, kan det ansvarlige affaldsselskab give oplysning om de nødvendige forholdsregler til en faglig korrekt bortskaffelse.

Garanti

For mangler, som skyldes materiale- eller fabriktionsfejl, gælder en to års garantifrist fra dagen for leveringen. Alle bevægelige dele, f.eks. batterier, kabler, netenheder, akkuer osv., er udelukket herfra. Mangler, som dækkes af garantien, udbedres gratis for kunden mod fremlægelse af salgskvitteringen. Der kan ikke tages hensyn til andre krav. Udgifter for transporten frem og tilbage debiteres kunden, hvis apparatet befinder sig på et andet sted end kundens adresse. Ved transportskader kan garantikrav kun gøres gældende, hvis hele den originale emballage er blevet benyttet til transporter, og varen har været sikret og befæstet deri på tilsvarende måde som originale emballagetilstand. Opbevar derfor alle emballagedele.

Garantien bortfalder, hvis apparatet åbnes af personer, som ikke udtrykkeligt er autoriseret hertil af seca.

I garantitilfælde beder vi kunder i udlandet om at henvende sig direkte til sælgeren i det pågældende land.



-overensstemmelses-
attest

Mekanisk længdemåleapparat

model seca 207

charge nr.: se målepindens bagside

Målemåtten opfylder de gældende krav fra direktiv 93/42/EØF om medicinprodukter.

Hamburg, May 2015

Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
①: www.seca.com

Hjärtliga gratulationer

Med mätstaven seca 207 har du fått en exakt och robust längdmättningsanordning för spädbarn.

Mätstaven kan användas både för att bestämma storleken på ett nyfött spädbarn och för kontroll under tillväxtprocessen.

Den är tillverkad av stabil och lättskött aluminiumprofil. Mättungorna av plast är hopfällbara - därmed sparas plats vid förvaringen.

Om ett väggfäste önskas används bifogade skruvar och distansbrickor.

Mätstaven kan fästas vågrät t.ex. över ett skötbord och kan där användas som fast mätanordning.

Mätstaven seca 207 används i sjukhus och läkarmottagningar.

Säkerhet

Innan den nya mätstaven används skall man ta sig tid till att läsa igenom följande säkerhetsanvisningar.

- Beakta anvisningarna i bruksanvisningen.
- Låt aldrig ett spädbarn ligga utan tillsyn med mätstaven. Det består fara för skada.
- Längdmätningen får endast utföras på underlag där spädbarnet inte kan falla ner.
- För att undvika onödig smittorisk skall man rengöra och desinficera mätstaven och vågen regelbundet.
- För en exakt längdmätning kan en medhjälpare vara bra att ha till hands.

Användning



Mätning:

1. Lägg spädbarnet på ett plant underlag. Placera mätstavens mättunga (1) på spädbarnets huvud.
2. Skjut mätmärket (2) mot barnets fötter med höger hand och håll fast barnet med vänster hand.
3. Sträck på barnets ben genom att försiktigt trycka ner knäna mot mätstaven.
4. Lägg an mättungan (2) rätvinkligt mot spädbarnets fotsulor.
5. Avläs kroppslängden på markeringarna på mätstavens (3) insida.

Om man följer ovanstående steg uppnås en mätnoggrannhet på bättre än ± 10 mm.

Fastsättning av mättungebreddningen...

- man kan förstora huvudstödytan.
- tryck mättungebreddningen på mättungan från ovansidan så att den hakar in märkbart. Breddningen kan där efter med ringa ansträngning skjutas på mättungan.

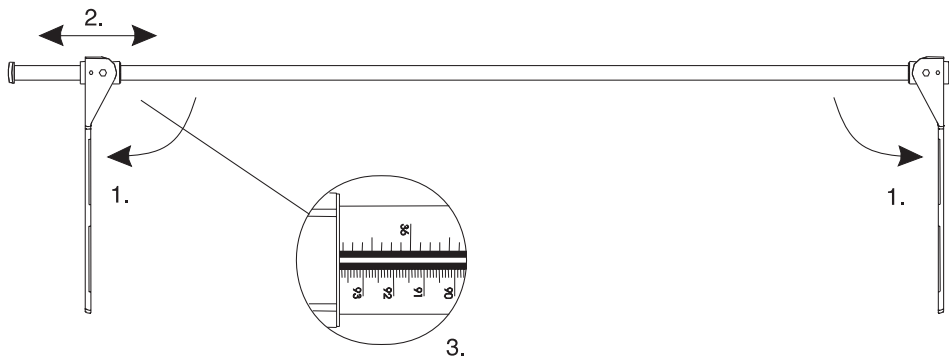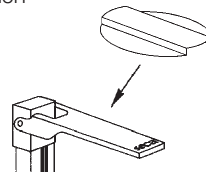

Rengöring

Mätstaven skall rengöras efter behov med ett vanligt hushållsrengöringsmedel eller desinfektionsmedel. Beakta tillverkarens anvisningar.

Tekniska data

Mätområde:	0-990 mm / 0-39 inch
Indelning:	1 mm / 1/8 inch
Noggrannhet:	bättre än ± 10 mm
Mått (B x H x D):	55 mm x 1050 mm x 34 mm
Vikt:	ca. 700 g
Temperaturområde:	+10°C till +40°C
Medicinsk produkt enligt direktiv 93/42/EWG:	Klass 1 med mätfunktion

Sophantering

När mätstaven inte längre kan användas skall den lämnas till föreskriven sophantering.

Garanti

För brister vilka kan hänföras till materiaeller fabriktionsfel lämnas en garantifrist på två år från leveransdatum. Undantagna från detta är alla rörliga delar, som t.ex. batterier, kablar, nättaggregat, laddningsbara batterier osv.. Brister vilka faller under garantin åtgärdas utan kostnad för kunden mot förevisande av köpkvittot. Övriga anspråk kan inte lämnas. Kunden står för transportkostnaderna när apparaten befinner sig på annan ort än kundens huvudadress. Vid transportskador kan garantianspråk endast göras gällande när för transporten den kompletta originalförpackningen använts och varan säkrats och fixerats i originalförpackat tillstånd. Ta därför vara på alla förpackningsdelar.

Garantin upphör att gälla när apparaten öppnats av person som inte uttryckligen auktoriserats av seca.

Kunder i utlandet ber vi att i garantifall ta kontakt med representanten i respektive land.

-Försäkran om överensstämmelse

Mekanisk längdmätningsanordning

Modell seca 207

Partinr.: se mätstavens baksida

Mätstaven uppfyller gällande krav enligt direktiv 93/42/EWG över medicinska produkter.

Hamburg, May 2015



Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
: www.seca.com

Hjertelig til lykke

Med målestaven seca 207 har du kjøpt et presist og samtidig robust lengdemåleapparat for spedbarn.

Målestaven benyttes både for å bestemme størrelsen av en nyfødt etter fødselen og som kontroll av kroppslengden under vekstprosessen.

Den er laget av stabilt og lettstelt aluminiumprofil. Måleskyvetungene av kunststoff kan slås opp - på denne måten kan målestangen lagres plassbesparende. Hvis veggmontering ønskes skal skruene og avstandsholderne som følger med benyttes.

Målestangen kan på denne måten f.eks. festes horisontalt over et stellebord og kan dermed brukes som stasjonær måleinnretning.

Målestangen seca 207 er laget for bruk på sykehus og legekontorer.

Sikkerhet

Før den nye målestaven tas i bruk skal sikkerhetsinformasjonene nedenfor leses nøye.

- Følg informasjonene i bruksanvisningen.
- La spedbarnet aldri ligge med målestaven uten oppsyn da det ellers er fare for skader.
- Gjennomfør lengdemålingen kun på underlag hvor spedbarnet ikke kan falle ned av.
- Vær oppmerksom på at målestav og vekt rengjøres og desinfiseres regelmessig for å unngå overføring av smittsomme sykdommer.
- For en eksakt lengdemåling er det best med to personer.

Betjening



Måleforløp:

1. Legg spedbarnet på et flatt underlag. Legg målestaven med måletungen (1) på spedbarnets hode
2. Skyv målelæren (2) med den høyre hånden i retning mot spedbarnets føtter. Den venstre hånden fikserer spedbarnet.
3. Strekk benene idet den venstre hånden trykker spedbarnets knær lett mot underlaget.
4. Legg med den høyre hånden målelæren (2) i rett vinkel mot småbarnets fotsåler.
5. Kroppslengden avleses på markeringen på målestavens innerside (3).

Hvis skrittene nevnt ovenfor overholdes oppnås en nøyaktighet bedre ± 10 mm.

Fest måletungeutvidelse...

- Du har muligheten til å utvide støtteflaten for hodet.
- Trykk måletungeutvidelse ovenfra på måletungen slik at den låses fast følbart. Utvidelsen kan da forskyves på måletungen uten anstrengelse.

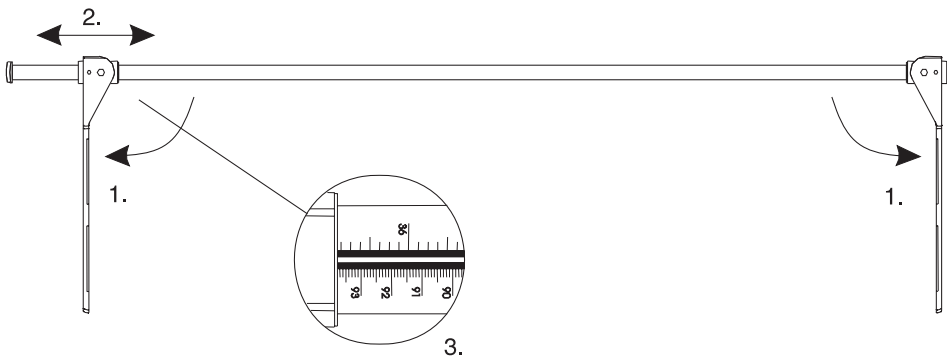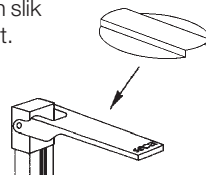

Rengjøring

Rengjør målestaven ved behov med et hus-holdningsrengjøringsmiddel eller et desinfeksjonsmiddel som er vanlig i handelen. Vær oppmerksom på produsentens henvisninger.

Tekniske data

Måleområde:	0-990 mm / 0-39 tommer
Deling:	1 mm / 1/8 tomme
Nøyaktighet:	bedre enn ± 10 mm
Dimensjoner (b x h x d):	55 mm x 1050 mm x 34 mm
Egenvekt:	Ca. 700 g
Temperatur- område:	+10°C til +40°C
Medisinsk produkt jf. direktivet 93/42/EEC:	Klasse I med målefunk- sjon

Avfallshåndtering

Hvis målestaven ikke kan benyttes lenger, gir deg den lokale miljøstasjonen gjerne opplysninger om fagmessig avfallshåndtering.

Garanti

For mangler som er å tilbakeføre til materielle eller produktionsfeil gjelder en garantifrist på to år fra levering. Alle bevegelige deler, som f.eks. batterier, kabler, nettapparater, oppladbare batterier etc. er unntatt fra garantien. Mangler som faller inn under garantien, utbedres gratis for kunden mot fremleggelse av kjøpskvitteringen. Andre krav kan ikke imøtekommes. Utgifter til transport frem og tilbake belastes kunden hvis apparatet befinner seg på et annet sted enn kundens adresse. Ved transport-skader kan garantikrav kun gjøres gjeldende hvis hele originalemballasjen brukes under transporten og varen sikres og festes i emballasjen på samme måte som i originalpakket tilstand. Ta derfor vare på alle emballasjedeler.

Garantien ugyldiggjøres hvis apparatet åpnes av personer som ikke er uttrykkelig autorisert av seca.

Kunder i utlandet bes i garantitilfeller ta direkte kontakt med forhandleren i vedkommende land.

-konformitetserklæring

Mekanisk lengdemåleapparat

Modell seca 207

Charge-nr.: se bakside målestav

Målestaven oppfyller de gjeldende kravene til direktivet 93/42/EØF til medisinske produkter.

Hamburg, May 2015



Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
: www.seca.com

Sydämelliset onnittelut

Ostamalla seca 207 mittasauvan olet hankkinut tarkan ja samalla kestävästi imeväisikäisten pituudenmittauslaitteen.

Mittasauva on tarkoitettu vastasyntyneiden syntymäpituuden mittaamiseen että myös vauvan pituuden valvontaan kasvuvaiheessa.

Sauva on valmistettu tukevasta ja helppo-hoitaisesta alumiinimuotoprofiilista. Muoviset siirrettävät mittakiekket ovat käännettäviä - minkä ansiosta mittasauva ei vaadi paljon tilaa säilytyksessä.

Mikäli sauva kiinnitetään seinään, tulee käyttää sen mukana toimitettuja ruuveja ja välikkeitä. Mittasauva voidaan kiinnittää näin vaakasuoraan esim. hoitopöydän yläpuolelle kiinteästi asennetuksi mittalaitteeksi.

Mittasauvaa seca 207 käytetään sairaaloissa ja lääkäreiden vastaanotoilla.

Turvallisuus

Ennen kuin otat uuden mittasauvan käyttöön, varaa vähän aikaa seuraavien turvallisuusohjeiden lukemiseen.

- Noudata käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
- Älä koskaan jätä vauvaa mittasauvan kanssa ilman valvontaa, koska on olemassa loukkaantumisvaara.
- Suorita pituuden mittaus vain alustalla, jolta vauva ei voi pudota.
- Puhdista ja desinfioi mittasauva ja vaaka säännöllisesti tarttuvien tautien ehkäisemiseksi.
- Tarkan mitan saamiseksi mittauksessa on hyvä olla mukana kaksi henkilöä.



Käyttö

Mittaaminen:

1. Laita vauva tasaiselle alustalle. Laita mittasauva siten, että mittausluistin kieleke (1) on vauvan päässä kiinni.
 2. Työnnä oikealla kädellä mittausluistia (2) vauvan jalkojen suuntaan pitäen vauvasta kiinni vasemmalla kädellä.
 3. Oikaise sääret painamalla vasemmalla kädellä varovasti vauvan polvia alustaa vasten.
 4. Aseta oikealla kädellä mittausluisti (2) suorassa kulmassa pikkulapsen jalkapohjia vasten.
 5. Lue pituus mittasauvan sisäpuolella olevasta merkistä (3).
- Edellä mainittuja vaiheita noudattamalla saavutetaan paremmin ± 10 mm:n tarkkuus.

Mittauskielekkeen levikkeen kiinnittäminen...

- Päätuentapintaa on mahdollista suurentaa.
- Paina mittauskielekkeen levike ylhäältä mittauskielekkeen päälle, niin että se lukittuu tuntuvasti kiinni. Levikettä voidaan sitten siirtää mittauskielekkeellä vähin voimin.

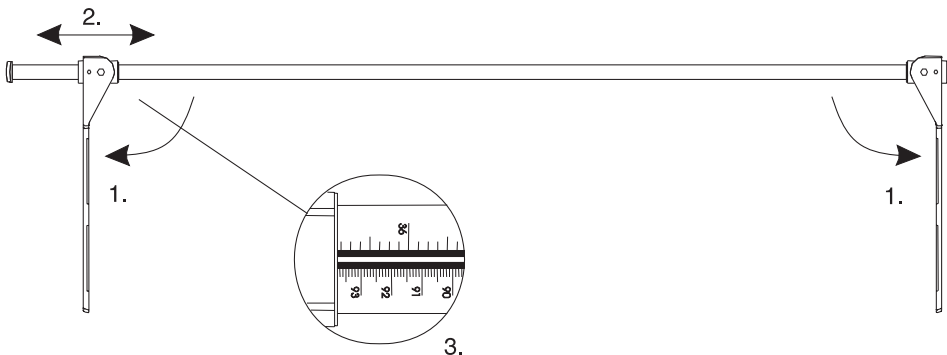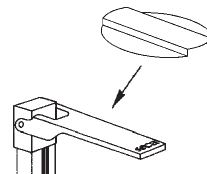

Puhdistus

Puhdista mittasauva tarvittaessa talouspesu-aineella tai tavanomaisella desinfiointiaineella. Noudata valmistajan antamia ohjeita.

Tekniset tiedot

Mittausalue:	0-990 mm / 0-39 tuumaa
Jako:	1 mm / 1/8 tuumaa
Tarkkuus:	parempi kuin ± 10 mm
Mitat (L x K x S):	55 mm x 1050 mm x 34 mm
Omapaino:	n. 700 g
Lämpötila-alue:	+10°C - +40°C
Lääketieteellinen tuote direktiivin 93/42/ETY mukaan:	Luokka I mittautustoimin- nolla

Jätteiden hävitys

Jos mittasauvaa ei voida enää käyttää, paikalliselta jätehuoltoliikkeeltä saat ohjeet, kuinka mittasauva hävitetään asianmukaisesti.

Takuu

Myönnämme puutteista, jotka johtuvat materiaalitai valmistusvirheistä, kahden vuoden takuun toimitus-ajankohdasta alkaen. Kaikki liikkuvat osat, kuten esim. paristot, sähköjohdot, verkkolaitteet, akut jne., eivät kuulu takuun piiriin. Takuun piiriin kuuluvat puutteet poistetaan asiakkaalle maksutta esitettäessä ostokuitti. Muita vaatimuksia ei ole mahdollista ottaa huomioon. Edestakaisesta kuljetuksesta syntyvät kulut menevät asiakkaan laskuun, jos laite on muulla kuin asiakkaan paikkakunnalla. Kuljetusvahingoista voidaan esittää korvausvaatimuksia vain, kun kuljetukseen on käytetty kokonaista alkuperäispakkausta ja tavara on varmistettu ja kiinnitetty pakkaukseen tavalla kuin alkuperäisessä toimituksessa. Kaikki pakkausosat tulee säilyttää tallella tästä syystä.

Takuu ei ole voimassa, jos laitteen avaa henkilö, jota seca ei ole nimenomaisesti valtuuttanut tähän.

Ulkomailla olevia asiakkaita pyydämme kääntymään takuutapauksessa suoraan kyseisen maan myyntiliikkeen puoleen.

 -yhdenmukaisuus-
vakuutus

Mekaaninen pituudenmittauslaite

malli seca 207

Erä-nro: ks. mittasauvan takaosaa

Mittasauva täyttää lääketieteellisiä tuotteita koskevan direktiivin 93/42/ETY vaatimukset.

Hamburg, May 2015



Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
: www.seca.com

Hartelijk gefeliciteerd

Met de meetlat seca 207 heeft u een precies en tegelijkertijd robuust lengtemeettoestel voor zuigelingen verkregen.

De meetlat dient zowel voor het bepalen van de geboortelengte van een zuigeling als voor de controle van de lichaamslengte tijdens het groeiproces.

Hij is vervaardigd van stabiele en gemakkelijk te onderhouden aluminiumprofiel. De schuiftongen van kunststof kunnen worden samengevouwen, zodat de meetlat ruimtebesparend kan worden opgeslagen.

Wanneer een bevestiging aan de wand gewenst is, kunt u de bijgesloten schroeven en afstandshouders gebruiken.

De meetlat kan zodoende horizontaal bijv. boven de kommode worden bevestigd en dient daar als stationaire meetinrichting. Toegepast wordt de meetlat seca 207 in ziekenhuizen en artspraktijken.

Veiligheid

Voor u de nieuwe meetlat gebruikt dient u zich de tijd te nemen om de veiligheidsinstructies te lezen.


- Neem de instructies in de gebruiksaanwijzing in acht.
- Laat de zuigeling nooit zonder toezicht met de meetlat liggen, omdat er anders gevaar voor letsel bestaat.
- Voer de lengtemeting alleen uit op een onderlaag waar de zuigeling niet af kan vallen.

- Let erop dat de meetlat en de weegschaal regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd worden om een infectie met besmettelijke ziektes te vermijden.
- Voor een exacte lengtemeting is in het ideale geval een tweede persoon nodig.

Bediening

Meetproces:


1. De zuigeling op een vlakke onderlaag leggen. De meetlat met de meetschuiftong (1) tegen het hoofd van de zuigeling leggen.
2. Met de linkerhand de meetschuif (2) in de richting van de voeten van de zuigeling schuiven. De linkerhand fixeert de zuigeling.
3. De benen strekken, door met de linkerhand voorzichtig de knieën van de zuigeling op de onderlaag te drukken.

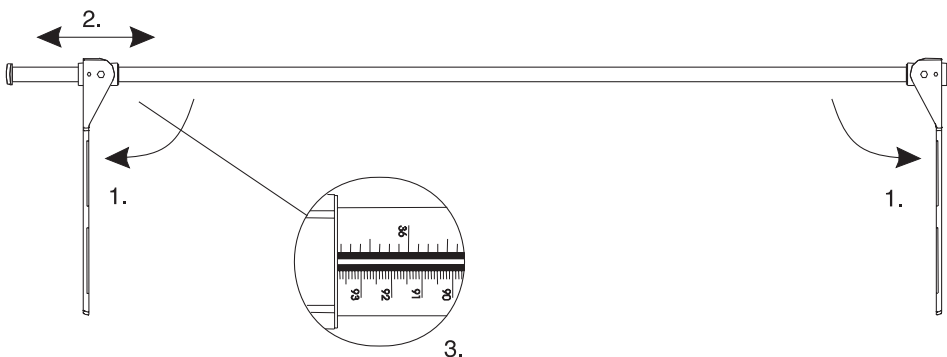

4. Met de rechterhand de meetschuif (2) in een rechte hoek tegen de voetzolen van het kind aanleggen.
5. De lichaamslengte op de markering aan de binnenkant van de meetlat aflezen. Bij het aanhouden van de bovengenoemde stappen wordt een precisie bereikt met een afwijking van minder dan ± 10 mm.

verbreding van de meet tong bevestigen...

- u heeft de mogelijkheid om het oplegvlak op het hoofd te vergroten
- druk de verbreding van de meet tong boven op de meet tong zodat deze merkbaar ineensluit. De verbreding kan dan met geringe krachtsinspanning op de meet tong verschoven worden.

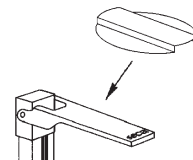

Reiniging

Reinig de meetlat desgewenst met een huishoudreiniger of een in de handel gebruikelijk desinfecteermiddel. Let daarbij op de aanwijzingen van de fabrikant.

Technische gegevens

Meetbereik:	0-990 mm / 0-39 inch
Indeling:	1 mm / 1/8 inch
Precisie:	beter dan ± 10 mm
Afmetingen (B x H x D):	55 mm x 1050 mm x 34 mm
Eigengewicht:	ca. 700 g
Temperatuurbereik:	+10° C tot +40° C
Medisch product overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG:	klasse I met meetfunctie

Verwijderen van afval

Wanneer de meetlat niet meer gebruikt kan worden verstrekt het verantwoordelijke afvalbedrijf inlichtingen over de noodzakelijke maatregelen voor de vakkundige verwijdering.

Garantie

Voor gebreken, die voortvloeien uit materiaal of fabricagefouten, geldt een garantieperiode van 2 jaar vanaf de levering. Alle beweeglijke delen zoals bijv. batterijen, kabels, voedingseenheden, accu's enz. zijn hiervan uitgesloten. Gebreken die onder de garantie vallen, worden tegen overdracht van de koopkwitantie kosteloos voor de klant verholpen. Met verdere aanspraken kan geen rekening worden gehouden. Transportkosten voor het zenden en terugsturen gaan ten laste van de klant, wanneer het apparaat zich op een andere plaats bevindt, dan de woonplaats van de klant. Bij transportschade kunnen er alleen garantieaanspraken geldend gemaakt worden, wanneer voor de transporten de originele verpakking wordt gebruikt en wanneer het artikel hierin volgens de origineel verpakte toestand beveiligd en bevestigd werd. Bewaar daarom alle verpakkingsdelen.

Er bestaat geen aanspraak op garantie wanneer het apparaat door personen wordt geopend die hiervoor niet uitdrukkelijk door seca werden geautoriseerd.

Klanten in het buitenland adviseren wij zich in geval van garantieaanspraken direct tot de verkoper van het desbetreffende land te richten.

 -Verklaring van
overeenkomst

Mechanische lengtemeter

Model seca 207

batchnr.: zie achterzijde meetlat

De meetlat voldoet aan de geldende eisen van de richtlijn 93/42/EEG inzake medische producten.

Hamburg, May 2015



Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
: www.seca.com

Parabéns

Com a vareta de medição seca 207, você passou a dispor de um aparelho de medição do comprimento de lactentes exacto e, ao mesmo tempo, robusto.

Esta vareta de medição destina-se tanto a medir o comprimento de bebés ao nascer como durante o seu processo de crescimento. É fabricado de perfil de alumínio resistente e fácil de limpar. As linguetas deslocáveis de medição são dobráveis – o que permite armazenar a barra de medição num espaço pequeno. Caso deseje a fixação na parede, use os parafusos e distanciadores fornecidos juntamente. Deste modo, a barra de medição pode ser fixada na horizontal, por exemplo, por cima da mesa onde se muda as fraldas às crianças, passando assim a servir de dispositivo de medição fixo.

A barra de medição seca 207 é usada em hospitais e consultórios médicos.

Segurança

Antes de utilizar esta nova vareta de medição, dedique um pouco do seu tempo à leitura das seguintes indicações de segurança:

- Respeite as indicações constantes das Instruções de Uso.
- Nunca deixe o lactente sozinho na vareta de medição sem vigilância porque há perigo de ferimentos.
- Efectue a medição, apoiando o aparelho sobre uma base suficientemente estável para que não haja o perigo do lactente cair.

- Tanto a vareta de medição como a balança têm de ser limpas e desinfectadas periodicamente para se evitar a transmissão de doenças contagiosas.
- Para a medição exacta do comprimento, o ideal será haver uma segunda pessoa.

Utilização

Operação de medição



1. Coloque o lactente sobre uma base plana. A lingueta móvel da vareta de medição (1) deve ficar encostada à cabeça do lactente.
2. Com a mão direita, faça deslizar o cursor de medição (2) até ficar encostado aos pés do lactente, segurando-o com a outra mão.
3. Estique-lhe as pernas, pressionando ao de leve nos joelhos da criança, com a mão esquerda.

4. Com a mão direita, encoste o cursor de medição (2) perpendicularmente às solas dos pés da criança.
5. Leia o comprimento do corpo, olhando para a marca existente na parte interior da vareta de medição (3).

Se seguir escrupulosamente estes passos, fica garantida uma margem de erro inferior a ± 10 mm.

Fixar o alargador da lingueta de medição...

- É possível aumentar a superfície de apoio para a cabeça.
- Enfie o alargador da lingueta de medição pelo lado de cima na lingueta de maneira a senti-lo encaixar. Agora, o alargador pode ser facilmente deslocado sobre a lingueta de medição.

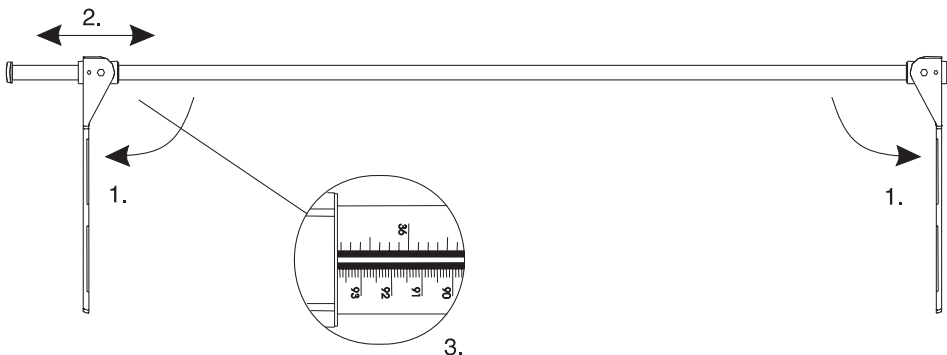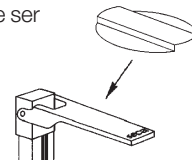

Limpeza

Limpe a vareta de medição sempre que for preciso, usando um produto de limpeza doméstico ou um qualquer desinfetante existente à venda. Observe as indicações dos fabricantes desses produtos.

Dados técnicos

Campo de medição	0-990 mm / 0-39 "
Divisão:	1 mm / 1/8 "
Precisão:	superior a ± 10 mm
Medidas (L x A x P):	55 mm x 1050 mm x 34 mm
Peso próprio:	aprox. 700 g
Gama de temperaturas:	+10°C a +40°C
Artigo médico segundo a 93/42/CEE:	Directiva classe I com função de medição

Eliminação

Quando a vareta de medição deixar de ser utilizada em definitivo, os serviços de recolha de lixo da sua câmara municipal fornecer-lhe-ão indicações sobre como proceder à sua eliminação correcta.

Garantia

A garantia para falhas decorrentes de defeito do material ou de fabrico é de dois anos, a partir da data do fornecimento. Excluem-se todas as partes móveis, como sejam pilhas, cabos, alimentadores, acumuladores, etc.. As falhas abrangidas pela garantia serão corrigidas gratuitamente mediante a apresentação do talão de compra. Não serão tidas em conta outras reclamações. Os custos de transporte de e para as instalações do cliente, caso se aplique, ficará a cargo do cliente. No caso de danos de transporte, a garantia só se aplica se tiver sido utilizada a embalagem original completa para acondicionar a mercadoria, de forma bem imobilizada e fixa, tal como se encontrava originalmente. Por este motivo, guarde todos os componentes da embalagem.

A garantia cessa se o aparelho tiver sido aberto por pessoas não expressamente autorizadas, pela seca, para o efeito.

Solicitamos aos nossos clientes de fora da Alemanha que, caso tenham direito à garantia, se dirijam directamente ao revendedor do país onde se encontram.



Declaração de Conformidade

Aparelho mecânico de medição do comprimento

Modelo seca 207

N.º de lote: vide retaguarda da vareta de medição

A vareta de medição cumpre os requisitos prescritos pela Directiva do Conselho 93/42/CEE sobre artigos médicos.

Hamburg, May 2015

Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
①: www.seca.com

Θερμά συγχαρητήρια

Με τον μετρητή ύψους seca 207 έχετε αποκτήσει μία συσκευή μέτρησης ύψους για βρέφη ακριβείας και ταυτόχρονα σταθερή. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται τόσο για την μέτρηση ύψους των νεογέννητων όσο και για να ελέγχεται το ύψος κατά την ανάπτυξη.

Είναι κατασκευασμένη από σταθερό και εύκολο στη συντήρηση προφίλ αλουμινίου. Οι πλαστικές συρόμενες γλώσσες μέτρησης είναι πτυσσόμενες και διευκολύνουν την αποθήκευση της ράβδου μέτρησης σε μικρό χώρο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε στήριξη στον τοίχο, χρησιμοποιήστε τους συνημένους κοχλίες και τα στηρίγματα απόστασης.

Η ράβδος μέτρησης μπορεί να στερεωθεί π.χ. πάνω από το τραπεζάκι φασκίωματος και χρησιμοποιείται ως στάσιμο σύστημα μέτρησης αναστήματος.

Η ράβδος μέτρησης seca 207 βρίσκει εφαρμογές σε νοσοκομεία και ιατρεία.

Ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε τον νέο μετρητή, διαθέστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες ασφάλειας.

- Τηρείτε τις υποδείξεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην αφήνετε ποτέ το βρέφος πάνω στον μετρητή χωρίς παρακολούθηση. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Να διεξάγετε τη μέτρηση του ύψους πάνω σε επιστρώσεις, από τις οποίες το

- βρέφος δεν μπορεί να πέσει.
- Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ο μετρητής και η ζυγαριά πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται προκειμένου να αποφευχθεί μετάδοση κολλητικών ασθενειών.
- Για να επιτύχετε μία ακριβή μέτρηση απαιτείται και ένα δεύτερο άτομο.

Χειρισμός

Πορεία μέτρησης:



1. Τοποθετήστε το βρέφος πάνω σε επίπεδη επίστρωση. Τοποθετήστε τον μετρητή μαζί με με τον δείκτη μέτρησης (1) στο κεφάλι του βρέφους.
2. Μετατοπίστε με το δεξί χέρι τον μοχλό μέτρησης (2) με κατεύθυνση προς τα πόδια του βρέφους. Με το αριστερό χέρι σταθεροποιήστε το βρέφος.
3. Εκτείνετε τους μηρούς με το να πιέσετε ελαφρά τα γόνατα του βرنφους προς την επίστρωση προσεκτικά με το

αριστερό χέρι.

4. Με το δεξί χέρι τοποθετήστε τον μοχλό μέτρησης (2) ορθογώνια στα πέλματα του μωρού.
5. Διαβάστε το ύψος στην ένδειξη που βρίσκεται στη μέσα πλευρά του μετρητή (3).
Αν ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα τότε θα επιτευχθεί καλύτερα ακρίβεια ± 10 mm.

Στερέωση επιμήκυνσης γλώσσας μέτρησης ...

- Έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την επιφάνεια επαφής κεφαλιού.
- Εφαρμόστε το τμήμα επιμήκυνσης στο επάνω μέρος της γλώσσας μέτρησης, μέχρι να ασφαλίσει σωστά.
Το τμήμα επιμήκυνσης λειτουργεί τηλεσκοπικά με ελάχιστη μυϊκή δύναμη.

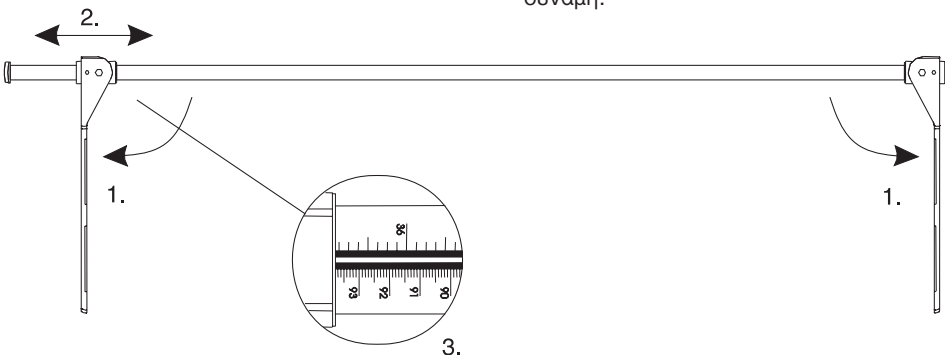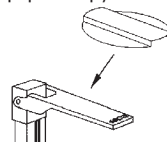

Καθαρισμός

Μπορείτε να καθαρίζετε τον μετρητή, αν υπάρχει ανάγκη, με ένα απορρυπαντικό οικιακής χρήσης ή με ένα κοινό μέσο απολύμανσης που θα βρείτε στο εμπόριο. Προσέξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τεχνικά στοιχεία

Τομέας μέτρησης:	0-990 mm / 0-39 ίντσες
Κλίμακα:	1 mm / 1/8 ίντσες
Ξκρίβεια:	καλύτερη από $\pm 10\text{mm}$
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ):	55 mm x 1050 mm x 34 mm
Βάρος:	περ. 700 g
Τομέας θερμοκρασίας:	+10 °C έως +40 °C
Ιατρικό προϊόν σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ:	Κατηγορία I με λειτουργία μέτρησης

Απόσυρση

Αν ο μετρητής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιά, τότε ο σύνδεσμος απόσυρσης αγαθών είναι πρόθυμος να σας δώσει πληροφορίες για τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λάβετε για την σωστή απόσυρση του μετρητή.

Εγγύηση

Για ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή κατασκευής, ισχύει διετής προθεσμία εγγύησης από την ημερομηνία παράδοσης. Όλα τα κινούμενα εξαρτήματα, όπως π.χ. μπαταρίες, καλώδια, τροφοδοτικά, συσσωρευτές κ.λπ., αποκλείονται από την εγγύηση αυτή. Ελαττώματα, τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση, επιδιορθώνονται δωρεάν για τον πελάτη με προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Περαιτέρω αξιώσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον πελάτη επιβαρύνουν τον πελάτη, εάν η συσκευή βρίσκεται σε άλλο μέρος από την έδρα του πελάτη. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται στη μεταφορά, μπορεί να εγερθεί εγγυητική αξίωση μόνο εφόσον χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταφορές η πλήρης γνήσια συσκευασία και Το προϊόν η ζυγαριά ασφαλίθηκε και στερεώθηκε στη συσκευασία όπως κατά τη γνήσια συσκευασία της. Για το λόγο αυτό διαφυλάξτε σε ασφαλές μέρος όλα τα μέρη της συσκευασίας.

Δεν υφίσταται εγγυητική αξίωση, εάν η συσκευή ανοίχτει από άτομα, τα οποία δεν έχουν τη ρητή εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό από την εταιρία seca.

Παρακαλούμε τους πελάτες μας στο εξωτερικό, σε περίπτωση εγγυητικής αξίωσης, να απευθυνθούν άμεσα στην αντιπροσωπεία αγοράς της εκάστοτε χώρας.

-Δήλωση Συμβατότητας

Η μηχανική συσκευή μέτρησης μήκους

Μοντέλο seca 207

Αρ. παρτίδας: Βλέπε στην πίσω πλευρά
του μετρητή

Ο μετρητής πληρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού 93/42/EWG όσον αφορά στα ιατρικά προϊόντα.

Hamburg, May 2015



Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
: www.seca.com

ご購入ありがとうございます

この度は、高精度でしかも堅牢性の高い乳幼児用身長計**seca 207**をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

乳児用身長計**seca 207**は、新生児の誕生時、及び乳幼児の成長期の身長測定検査に使われます。

本身身長計は堅固で手入れの簡単な成型アルミニウム材からなります。

硬性プラスチックからなるストッパー部分は折りたたみ可能で、収納場所をとりません。

壁に設置することをご希望の場合は、付属のスクリーネジと中間リングで固定してください。

身長計を、例えばおむつ交換台などに水平に固定して、測定器として設置することができます。

本身身長計**seca 207**は主に病院・医院・診療所で使われることを目的とした製品です。

安全にご使用いただくために

新しい身長計をご使用になる前に、是非、下記の安全性についての注意事項に目をお通しください。

- 取扱説明書の項目にご注意ください。
- 乳幼児を身長計と共に寝かせたままで放置することは、絶対に避けてください。怪我の原因となることがあります。
- 身長の測定は、乳児が落下する危険のない台の上で行ってください。
- 感染性の病気の伝染を避けるため、身長計を清潔に保ち、定期的に消毒することを忘れないでください。

- 身長測定の厳密な測定のためには、二人目の測定者が補佐することが理想的です。


操作方法

測定の手順

1. 乳幼児を平らな台に寝かせてください。
身長計のストッパー(1)を乳幼児の頭に設置してください。
2. 乳児の足の方へストッパー(2)を右手でスライドさせてください。乳幼児が動かないように左手で軽く押さえてください。
3. 左手で乳幼児のひざを台に慎重に軽く押さえて、脚が伸びるようにしてください。
4. 右手でストッパー(2)を乳幼児の脚の裏に直角に設定してください。
5. 測定尺の内側のマークの位置で身長を読み取ってください(3)。
上記の測定法に従えば、誤差が $\pm 10\text{mm}$ 以下の優れた精確度に達します。


ストッパーに円盤を取付ける

- 頭にあてるストッパーの中を広げることができます。
 - 円盤をストッパーに載せて、カチッと嵌るように押ししてください。
- 円盤は、軽く引くことでストッパー上をスライドさせることができます。

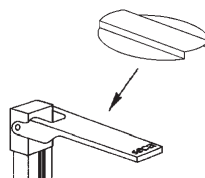

クリーニング

身長計を、必要に応じて住居用洗剤または市販の消毒剤で拭いてください。メーカーの注意事項を守ってください。

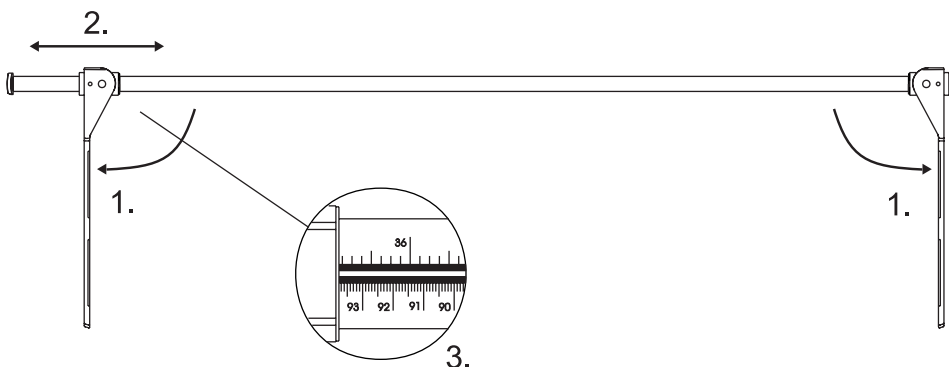

技術データ

測定範囲	0～990mm / 0～39インチ
目盛単位:	1mm / 1/8インチ
精密度:	± 10mm
製品寸法 (巾×高×奥行)	55×1050×34mm
本体重量:	約700g
周囲温度	+10° C～+40° C
93/42/EWG (EC医療機器基準)による医療機器 製品:	第一級計測器

廃棄処分

身長計が使用されなくなった場合は、管轄の公共自治体の粗大ごみ処理の担当部門から、必要な処置についての指示を得てください。

保証

材質または製品の欠陥については、製品が配送されてから一年間の保証期間が適用されます。乾電池、コード、ACアダプター、充電式電池などの可動の部品はこれにあてはまりません。保証が適用される欠陥は無料で修理されます。その場合、領収書の提示が必要です。

この条件にあてはまらない要求には応じられません。お客様の住所以外の場所からの運送費は、お客様の負担になります。運送中に生じた欠陥についての保証は、運送が完全な本来の梱包状態にあり、製品が本来のパッキングで保護されて固定されていた場合にのみ適用します。そのため、梱包部材は全て保管してください。

seca社から資格を与えられた担当者以外によって器械内部があげられた場合の保証は負いかねます。

海外のお客様の商品保証のケースは、製品をお求めになられた際の担当の店員がうけたまわります。

seca 有限会社

〒262-0011

千葉県千葉市花見川区三角町94

電話: +81 (0) 43-216-0850

ファックス: +81 (0) 43-216-0851

seca yk.

94 Sankakucho, Hanamigawaku,

Chiba City, Chiba 262-0011, Japan

Phone: +81 (0) 43-216-0850

Fax: +81 (0) 43-216-0851

Gratulujemy

Kupując przyrząd seca 207, nabyli Państwo precyzyjny, a jednocześnie solidny przyrząd do pomiaru długości ciała niemowląt.

Przyrząd seca 207 służy zarówno do określania długości urodzeniowej noworodków, jak i do kontroli długości ciała w procesie wzrastania. Wykonano go ze stabilnego, łatwego w utrzymaniu profilu aluminiowego.

Wykonane z tworzyw sztucznych języki pomiarowe są składane, dzięki czemu miarka po złożeniu nie zajmuje dużo miejsca.

W przypadku mocowania przy ścianie należy użyć dostarczonych śrub i elementów dystansowych.

Zamontowana w położeniu poziomym, np. nad stołem do przewijania, miarka będzie służyć jako stacjonarny przyrząd pomiarowy.

Miarki do pomiaru długości ciała niemowląt seca 207 stosuje się w szpitalach oraz w gabinetach lekarskich.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem nowego przyrządu prosimy poświęcić nieco czasu na lekturę poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

- Należy przestrzegać wskazówek, zawartych w instrukcji obsługi.
- Nie pozostawiać nigdy niemowlęcia bez opieki w okolicy przyrządu, ponieważ może to zagrażać odniesieniem obrażeń.
- Pomiaru długości ciała niemowlęcia należy dokonywać tylko na takim podłożu, z którego nie może ono spaść.

- Należy regularnie czyścić i dezynfekować przyrząd, wykluczając w ten sposób przenoszenie chorób zakaźnych.
- Aby pomiar długości ciała był dokładny, dobrze byłoby, aby w pomiarze brała udział druga osoba.

Obsługa



Przebieg pomiaru:

1. Ułożyć niemowlę na płaskim podłożu. Przyłożyć miarkę językiem (1) do głowy niemowlęcia.
2. Przesunąć prawą ręką suwak (2) w kierunku stóp niemowlęcia. Lewą ręką przytrzymać niemowlę.
3. Wyprostować nogi, dociskając ostrożnie lewą ręką kolana niemowlęcia do podłoża.
4. Dosunąć prawą ręką suwak (2) prostopadłe do spodu stóp niemowlęcia.

5. Odczytać długość ciała przy znaku odczytu po stronie wewnętrznej przyrządu (3). Postępowanie zgodne z powyższym opisem umożliwia uzyskanie dokładności pomiaru powyżej ± 10 mm.

Zamocować nakładkę na przesuwny język wzrostomierza...

- Daje to możliwość zwiększenia powierzchni przylegania języka do głowy.
- Wcisnąć nakładkę od góry na język tak, żeby się wyraźnie zatrzasnęła. Nakładka daje się lekko przesunąć po języku miarki.

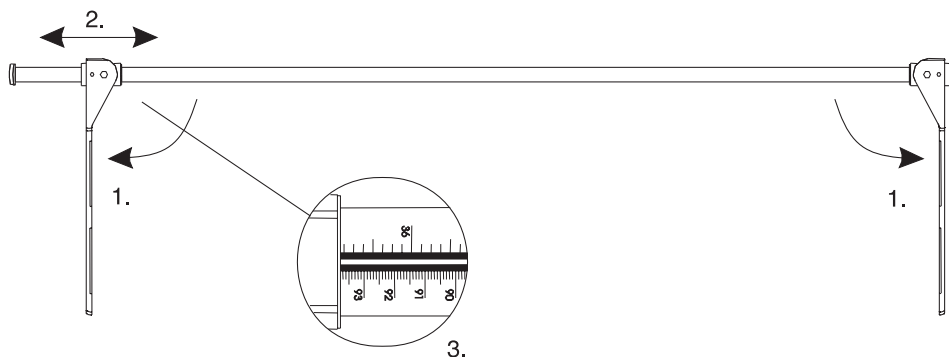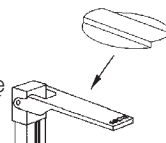

Czyszczenie

W razie potrzeby miarkę można czyścić płynami używanymi w gospodarstwie domowym albo jednym z typowych środków dezynfekcyjnych. Prosimy przestrzegać wskazówek producenta.

Dane techniczne

Zakres pomiaru: 0-990 mm / 0-39 ins

Działka

elementarna: 1 mm / 1/8 ins

Dokładność: powyżej ± 10 mm

Wymiary

(szer. x wys. x

głęb.): 55 mm x 1 050 mm x 34 mm

Masa własna: ok. 700 g

Zakres

temperatur: $+10^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$

Wyrób medyczny

zgodny z dyrektywą

93/42/EWG: klasa I z funkcją
pomiaru

Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania przyrządu właściwą jednostką zajmującą się utylizacją odpadów udzieli Państwu informacji o prawidłowym sposobie utylizacji.

Gwarancja

Na braki spowodowane błędami materiałowymi albo produkcyjnymi udzielamy dwuletniej gwarancji (licząc od dnia dostawy). Gwarancja nie obejmuje części ruchomych, takich jak baterie, kable, zasilacze, akumulatory itp. Usterki podlegające gwarancji są usuwane bezpłatnie za okazaniem dowodu zakupu. Nie uwzględnia się innych roszczeń. Jeżeli urządzenie znajduje się w miejscu innym niż siedziba klienta, koszty transportu do naprawy i z naprawy ponosi klient. W przypadku uszkodzeń transportowych roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać tylko pod warunkiem, że do transportu użyto kompletnego, oryginalnego opakowania, a produkt zabezpieczono i zamocowano w opakowaniu zgodnie ze stanem oryginalnym. Dlatego należy przechowywać wszystkie elementy opakowania. Jeżeli urządzenie zostałoby otwarte przez osobę, która nie posiada wyraźnej autoryzacji producenta, to wszelkie prawa z tytułu gwarancji wygasają. Klientów zagranicznych prosimy, aby w przypadku usterek objętych gwarancją zwracali się bezpośrednio do sprzedawcy w danym kraju.



Deklaracja zgodności

Mechaniczny przyrząd do pomiaru długości
ciała niemowląt

Model seca 207

Nr partii: patrz tylna strona miarki

Miarka do pomiaru długości ciała niemowląt spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG o wyrobach medycznych.

Hamburg, May 2015

Frederik Vogel
Geschäftsführer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
i: www.seca.com

seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • info@seca.com

All contact data under www.seca.com

17-10-02-221j/05-2015 G

seca
group

seca deutschland

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria