


seca 417

Toise légère et stable pour
une utilisation mobile

nouveauté

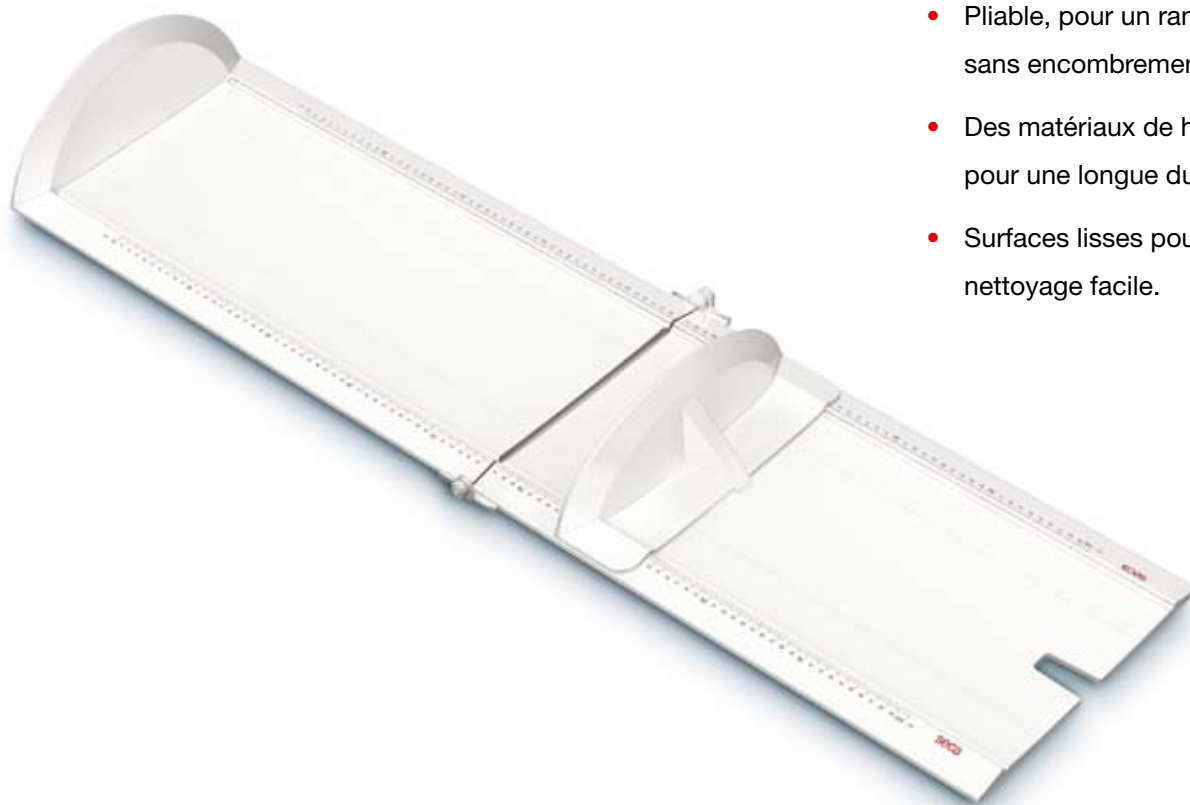

- Fonctionnement simple pour une utilisation mobile rapide.
- Pliable, pour un rangement sans encombrement.
- Des matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie.
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile.

seca

La précision au service de la santé

seca 417 :**Allégez le travail.**

La toise seca 417 est l'alternative mobile à l'infantomètre seca 416. Son mécanisme pliable et son faible poids font de la seca 417 un outil compact et facile à transporter. Elle est simple d'utilisation et, grâce à ses surfaces lisses, facile à nettoyer. La haute qualité des matériaux utilisés dans sa fabrication garantit sa résistance et une longue durée de vie.

**Facilité d'utilisation.**

Les deux parties de la toise seca 417 sont reliées par une charnière. La toise est également dotée d'un appuie-tête intégral et d'un appuie-pieds coulissant sur des rails légèrement surélevés. Pour réaliser une mesure précise, il suffit à l'utilisateur de positionner la tête de l'enfant contre l'appuie-tête, d'étirer les jambes et de glisser l'appuie-pieds jusqu'au contact avec la plante des pieds.



La lecture du résultat est facile à lire sur la grande échelle.

Facilité de lecture de la mesure.

Le stadiomètre seca 417 est l'outil idéal pour une utilisation mobile. Au cours des examens, le personnel médical doit contrôler l'état nutritionnel et le développement de nourrissons et de jeunes enfants. Pour le faire aussi rapidement que possible, une lecture facile des résultats est importante. Les marquages rouges et l'échelle graduée ne s'estomperont pas, même après des années d'utilisation intense.




Le mécanisme pliable garantit une longue durée de vie.

Facilité de nettoyage.

Les surfaces lisses et arrondies protègent des coups et des chocs pendant la mesure et facilitent le nettoyage. L'appuie-pieds est amovible pour faciliter le nettoyage des rails. Le plastique ABS hypoallergénique et l'échelle graduée résistent à tous les désinfectants et produits de nettoyage courants.

Longue durée de vie.

La légèreté de la toise est à l'image de la haute qualité de son mécanisme pliable, son appuie-tête et son appuie-pieds. Les matériaux ont été choisis avec soin pour résister à des années d'utilisation sur le terrain sans perdre leur forme. Sa housse de transport en nylon hydrofuge offre au stadiomètre seca 417 une protection supplémentaire.

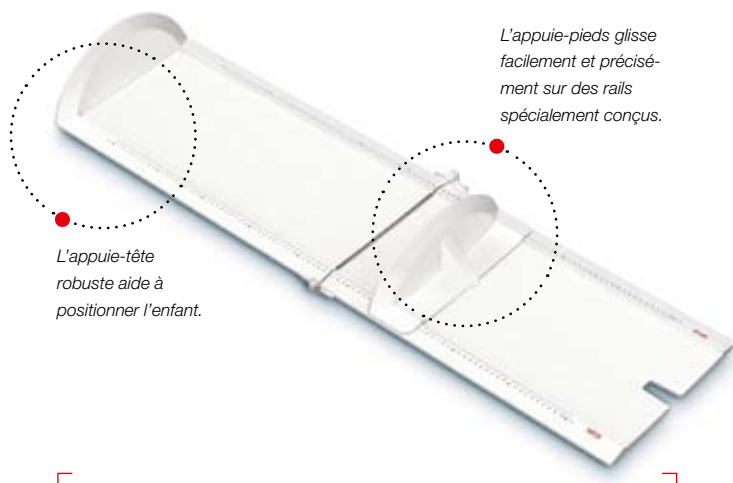

L'appuie-tête robuste aide à positionner l'enfant.

L'appuie-pieds glisse facilement et précisément sur des rails spécialement conçus.

seca 417**Caractéristiques techniques**

- Plage de mesure : 10 – 100 cm
- Graduation : 2 mm
- Dimensions, toise (LxHxP) : env. 1.120 x 120 x 310 mm
- Dimensions, pliée (LxHxP) : env. 577 x 115 x 300 mm
- Poids : 1,4 kg