


seca 704s

EMR ready 身長計付 デジタルコラムスケール (検定付) (III)

EMR-integrated

3年間
保証対象製品

EMR

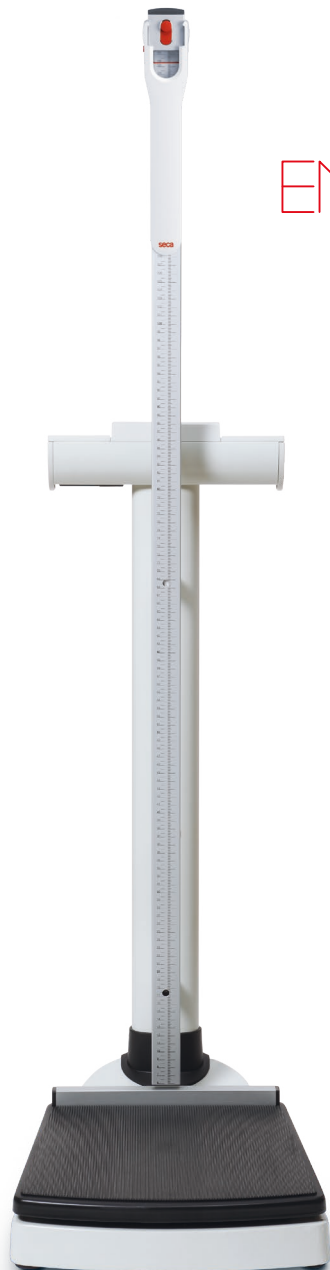

- 最小目盛 1 mmで230 cmまで測定可能な一体型メジャーロッド付き
- 測定値(体重値のみ)をワイヤレスでPCに送信可能
- 300 kgまで計測可能な頑丈なボディ
- 表示単位: 150 kgまで50 g、150 kg以上100 gの高精度体重計
- BMI機能、風袋引き機能、オートホールド機能、2 in 1機能、調整可能なダンピング機能付き

seca 704s:

体重と身長がワンステップで計測可能なマルチタレント

体重、身長、BMIの測定が必要なとき、seca 704sなら小さな幼児から大きな大人まで測定可能です。身長計と一体型なので体重と身長がワンステップで測定することができます。測定データはEMR readyのテクノロジーによりsecaソフトウェア搭載のPCへ送信することが可能です (体重値のみ)



最大計量300 kg

seca 704sの広く大きな計量台は体の大きな方でも安全かつ快適に体重測定ができます。安定性のある強固なフレームと計量台の滑り止めゴムマットは患者に最大限の安全性を提供します。

プリセット風袋機能、2 in 1機能、ホールド機能、オートホールド機能付き

患者の体重から衣類の重量を差し引きたいですか？プリセット風袋機能を使用してください。むずがる子供を親が抱いたまま体重測定をしたいですか？2 in 1機能を使用してください。ホールドキーを押せば後で呼び出したい重さを保存できます。メニューを使ってオートホールド機能を選ぶこともできます。

seca電子カルテ連動ソリューション：仕事の流れを改善する方法

seca 704sは病院の電子カルテシステムにネットワークを介して測定値を統合できます。seca 452を介して測定値は電子カルテへ直接送信され、即座に全てのユーザー端末で確認可能となります。外付けのバーコードスキャナーを取り付けることにより、患者と利用者双方を確認ことができ、測定結果は常に正確に登録されます。これにより時間を節約し、プロセスの信頼性を向上し、通信エラーを排除します。(別途費用) seca電子カルテ連動ソリューションに関するお問い合わせはこちらへ：info@seca.co.jp



三方向に目盛が付いているので読み取りが簡単です



EMR readyのテクノロジーでseca 704sは測定値をsecaソフトウェア搭載PCへ送信することが可能です (体重値のみ)

seca 704s

Technical Data

- 最大計量: 300 kg
- 表示単位: 150 kgまで50 g、150 kg以上100 g
- サイズ (W×H×D): 360 × 1,408 × 520 mm
- 計量台サイズ (W×H×D): 335 × 80 × 345 mm
- 身長測定範囲: 7–230 cm
- 重量: 17.6 kg
- 電源: 単三乾電池 × 6本、ACアダプター (別売オプション)
- 機能: 風袋引き機能、プリセット風袋機能、2 in 1機能、BMI機能、ホールド機能、オートホールド機能、オートクリア機能、ダンピング機能、自動電源オフ機能、送信機能
- 別売オプション: ACアダプター 401 無線・有線プリンターセット
- 精度等級: 3 級

システム連携：すべての電子カルテシステム(EMR)そしてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動については別途費用が必要となります。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。