


# seca 213I

## Estadiómetro portátil con nivelador integrado

optimizado

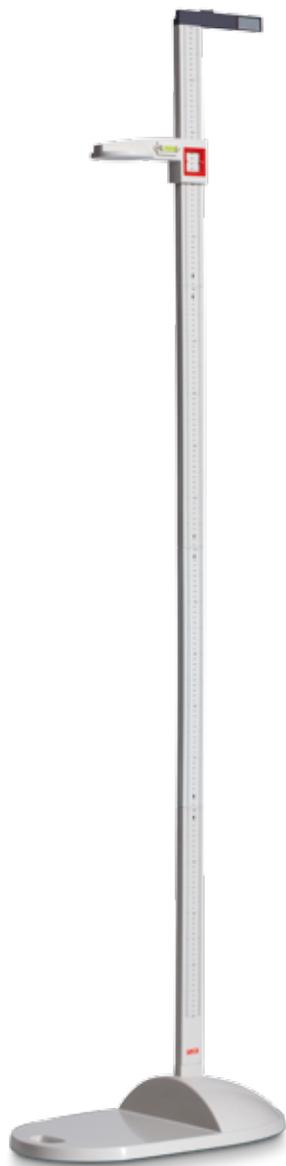

- Equipado con nivelador para lograr un correcto posicionamiento.
- Montaje fácil y sencillo, sin fijación a la pared.
- Base amplia que proporciona estabilidad.
- Fácil lectura de resultados durante la medición.
- Cómodo y fácil de transportar.

## seca 213I:

### El método portátil más cómodo para medir la estatura.

El estadiómetro seca 213I es particularmente útil para aplicaciones que requieren desplazamientos, p. ej., para medir a niños y adolescentes durante las revisiones médicas escolares, para personas que cuidan pacientes, personal de la salud que debe transportarse de un lugar a otro y también para consultorios médicos y hospitales que se especializan en pediatría y medicina juvenil. Además, seca 213I se puede emplear para medir a personas recostadas. Una vez que se desmonta, el estadiómetro se puede transportar con facilidad a cualquier sitio sin que afecte su funcionamiento, debido a que el nivelador garantiza una posición correcta y un soporte horizontal.



#### Montaje rápido y sencillo, sin fijación en la pared.

Debido a que se desmonta en varias partes, el estadiómetro seca 213I se puede armar de manera fácil y rápida y fijarse a la placa de base con pocas maniobras, sin necesidad de asegurarlo a la pared.

#### Su placa de base permite transportarlo donde necesite.


El estadiómetro seca 213I se puede usar en cualquier lugar, gracias a la estabilidad de su amplia placa de base. Por esta razón, el estadiómetro seca 213I es la herramienta ideal para los profesionales que requieren de instrumentos de medición confiables que no se deslicen de un lado a otro.

#### Lectura precisa de los resultados.

La corredera se desliza con gran suavidad, facilitando enormemente el ajuste del amplio tope superior. Otro aspecto de gran utilidad es la escala de fácil lectura: impresa al lado de la vara de medición permite consultar la estatura durante la medición, y, por ende, garantiza resultados precisos, incluso en estaturas de hasta 205 cm.

#### Cómodo y fácil de transportar.

Práctico: el estadiómetro seca 213I es fácil de transportar de un lugar a otro, no sólo porque se desmonta rápidamente, sino porque cuenta con una manija que permite realizar este desplazamiento.

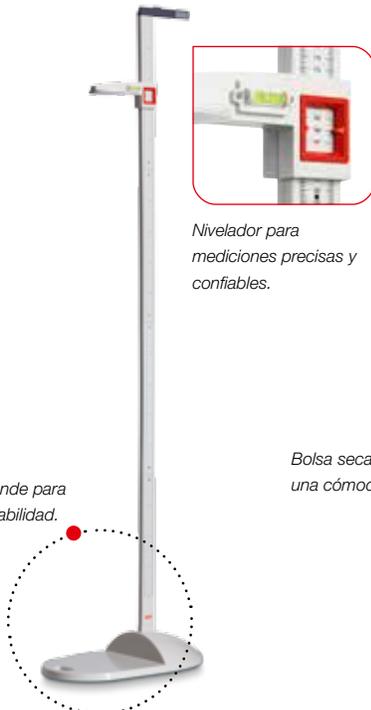


Nivelador para mediciones precisas y confiables.



Manija integrada y bloqueos seguros en todas las piezas para una fácil transportación.

Plataforma grande para una mayor estabilidad.

Bolsa seca 412 para una cómoda transportación.

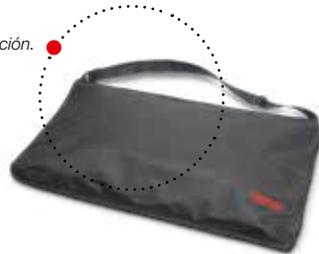

## seca 213I

### Datos técnicos

- Rango de medición: 20 – 205 cm / 8 – 81"
- División: 1 mm / 1/8"
- Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2"
- Dimensiones, para la transportación (AxAxP): 337 x 177 x 624 mm / 13.3 x 7 x 24.6"
- Peso: 2.4 kg / 5.3 lbs
- Opcional: bolsa transportadora seca 412