


# seca 227 & seca 228

## 身長計

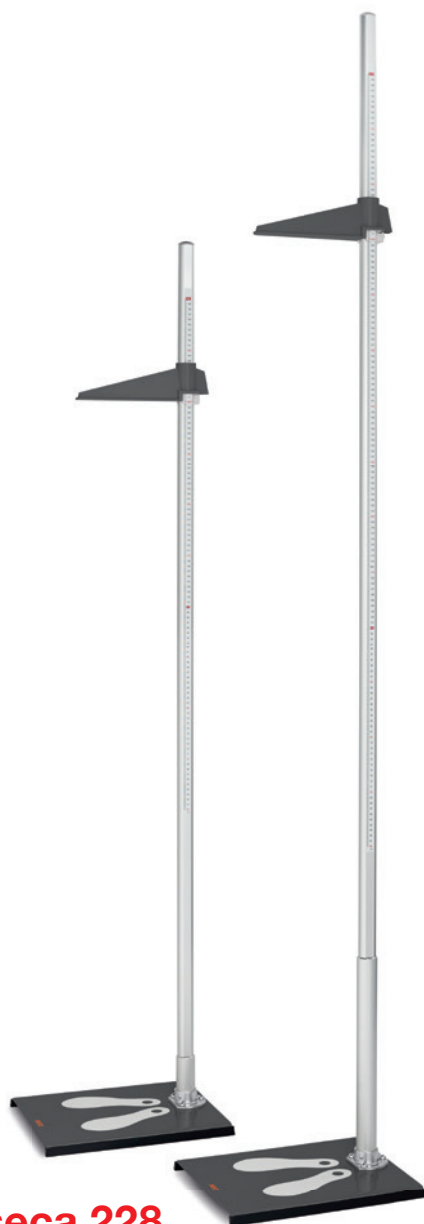

- 低重心で安定した設計。
- フランジ部分には曲がりにくいダイキャストを使用。
- 汚れが付きにくいアルマイト加工。
- メジャー部分はアルミを蒸着させたペット素材を使用。
- 測定台の脚は様々な床の形にフィットしやすい先細タイプ。

seca 227

seca 228

## seca 227 & seca 228:

### 細部の素材にこだわった高品質な身長計。

Seca 227とseca 228は構成される細部の素材と測定精度に極限までこだわった高品質な身長計です。メジャー部分にはアルミを蒸着させ激しい温度差にも伸び縮みしづらくなっています。また測定者の立ち位置を決め易いフットプリントや測定時に寄りかかっても曲がりにくいダイキャストを支柱の根本に採用した100%日本市場の要求に答えた製品です。



#### 幼児用と大人用の2種類を用意。


細部の素材にまでこだわった高品質な身長計に160 cmまで測定可能なseca 227(幼児用)と200 cmまで測定可能なseca 228(大人用)の2種類をご用意しました。

#### 安定感のある細部にこだわった設計。

seca 227とseca 228の測定台の脚は様々な床にフィットしやすい形状で出来ております。測定台にはフットプリントを採用し測定者の立ち位置を決めやすくなっています。支柱のフランジ部分にはダイキャストを使用し寄りかかっても曲がりづらくなっています。またアルマイト加工で汚れがつきにくくお手入れも簡単です。

#### ダブルメジャー採用で両サイドから読み取り可能。

アルミを蒸着させたベット素材のメジャー部分は激しい温度差にも耐え、伸び縮みしづらい構造です。また両サイドにメジャーがついているダブルメジャーの採用で左右どちらからでも測定値の読み取りが可能です。なめらかに動くヘッドプレートには測定値が見やすい透明の読み取り窓が付いていて正確な測定を実現します。

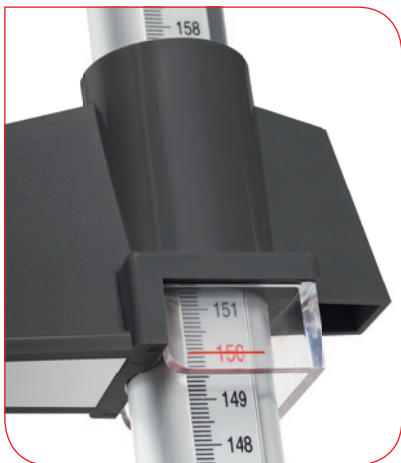

表示部には測定値を正確に読み取るための読み取り窓方式を採用。



測定姿勢を保ちやすいフットプリント付。

## seca 227 & seca 228

### Technical Data

#### 227

- サイズ：W 317 x D 374 x H 1721 mm
- 重量：約 5.5 kg
- 使用範囲：60 ~ 160 cm
- 最小目盛：1 mm

#### 228

- サイズ：W 317 x D 374 x H 2131 mm
- 重量：約 5.9 kg
- 使用範囲：60 ~ 200 cm
- 最小目盛：1 mm