

Estación de medición con validación por HCE para la estatura y el peso


seca
Precisión para la salud

seca 285

- + Medir y pesar en un paso con precisión absoluta
- + Graduación precisa de 50 g a una capacidad muy alta de hasta 300 kg
- + Alineación precisa de la cabecera de la línea Frankfurt seca
- + Amplio rango de medición de la estatura: adecuado para pacientes adultos y pediátricos
- + Pantalla táctil de tres líneas para visualización simultánea de peso, estatura e IMC
- + Plataforma de vidrio de alta calidad con un posicionador de talón para una medición exacta de tres puntos
- + Display móvil con pantalla iluminada en cabecera donde se visualiza la estatura del paciente
- + Validada por HCE: transmite los datos medidos directamente a cualquier sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) o a una impresora



Estación de medición con validación por HCE para la estatura y el peso

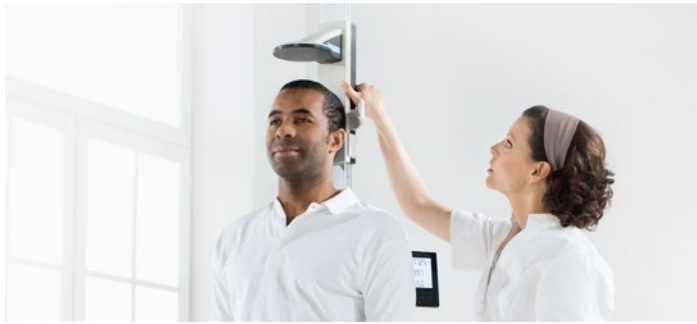

Medición y pesaje en una sola operación


Con seca 285, la estatura y el peso se determinan en unos pocos pasos simples y, si lo desea, se envían directamente a la HCE del paciente o a una PC. La combinación de medir y pesar en una estación de medición ahorra tiempo de trabajo y es más conveniente. Además, el IMC se puede calcular automáticamente. Con la cabecera de alta calidad, la línea Frankfurt seca y la graduación fina de la báscula, las estaciones de medición siempre ofrecen resultados absolutamente precisos.

Clase de aprobación	III
Capacidad	300 kg
Graduación	50 g < 150 kg > 100 g
Dimensiones (AxAxP)	434 × 2.394 × 466 mm / 17,1 × 94,25 × 18,3 in
Dimensiones plataforma (AxAxP)	430 × 60 × 365 mm / 16,9 × 2,4 × 14,4 in
Peso neto	16 kg / 35,3 lbs
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente, Baterías para cabezal
Funciones	Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, CLEAR, Auto-CLEAR, RESET, Conmutación automática del rango de pesaje, Calibración / calibración automática, Amortiguación ajustable, Auto-IMC, Función madre+bebé, TFG (Tasa de grasa corporal), Configuración de cero definida por el usuario, SEND/Auto-SEND
Interfaces	Wi-Fi / Ethernet opcional con seca 452
Accesorios	+ Módulo de interfaz seca 452

Medical Device Regulation (MDR) certificado

Medición de la altura

Rango de medición	30 – 220 cm
Estadimetro graduado	1 mm

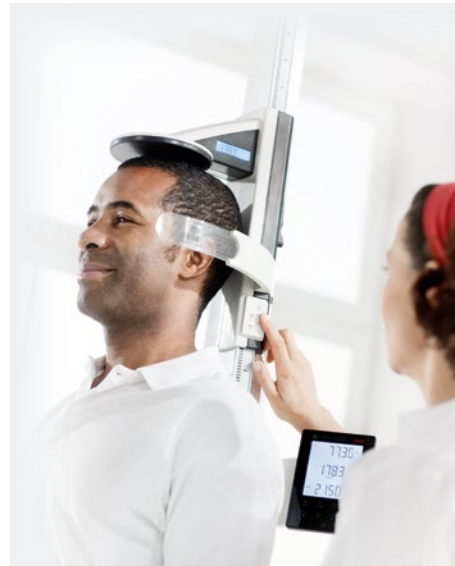

Gran rango de medición y pesaje con máxima precisión

El seca 285 tiene un rango de medición y pesaje muy amplio, lo que lo hace adecuado para niños y adultos por igual, y también se caracteriza por su alta precisión. El siguiente punto que ilustra la alta calidad de la estación de medición es el procesamiento y el equipo: Una pantalla principal iluminada y una pantalla de estatura en la cabecera. La línea Frankfurt seca también ofrece una alineación precisa de la cabeza y una plataforma de vidrio resistente con un posicionador de talón.



Soluciones de integración de seca: Cómo mejorar significativamente los flujos de trabajo.

La capacidad de integración significa que seca 285 se integra en el sistema de información del hospital a través de la red. De esta manera, los datos medidos se pueden enviar directamente a la HCE del paciente al pulsar una tecla, donde están inmediatamente disponibles para todos los usuarios. También se utiliza un escáner de códigos de barras USB adicional para documentar quién midió a quién y cuándo (identificación de paciente y usuario). Esto le ahorra tiempo, aumenta la confiabilidad del proceso y elimina los errores de transmisión.