

# seca 334

## Pèse-bébé électronique portable



- Fonction de contrôle d'allaitement (BMIF – Breast Milk Intake).
- Maniable et léger, pour une utilisation médicale mobile.
- Nacelle confortable.
- Affichage LCD de grande taille bien lisible.
- Amortissement automatique pour des résultats fiables.
- Toise seca 232 en option.

**seca 334:**

## Le pèse-bébé portable à amortisseur d'oscillations.


Pour qu'une technologie de pointe serve à quelque chose, il faut qu'elle fasse ses preuves au quotidien. Le pèse-bébé électronique seca 334 a tout ce qu'il faut pour faciliter le travail quotidien dans les cabinets de consultation et les hôpitaux : convivial, portable et robuste, il satisfait toutes les exigences auxquelles doit répondre la balance idéale en pédiatrie.

**Maniable et léger, pour une utilisation médicale mobile.**

Avec seulement 3,4 kg, cette balance est le poids plume de sa catégorie. La poignée latérale intégrée facilite le transport. Un autre détail pratique : la forme plate et peu encombrante de ce pèse-bébé permet de le ranger dans le tiroir d'une table à langer. La sacoche seca 428 disponible en option protège la balance pendant le transport.

**Grande nacelle et affichage LCD bien lisible pour utilisation confortable.**

Le bébé est à l'aise et pesé en toute sécurité dans la grande nacelle de la balance seca 335. Les bébés de grande taille et les enfants en bas âge peuvent être pesés en position assise. Le poids est indiqué sur le module LCD bien éclairé et reste affiché pendant deux minutes. La fonction d'extinction automatique garantit un service économique. La fonction BMIF permet de déterminer la quantité de lait ingérée par le nourrisson lors de l'allaitement : il suffit d'appuyer sur une touche pour que le résultat de la pesée du nourrisson avant l'allaitement soit mémorisé et soustrait de celui de la pesée après l'allaitement.

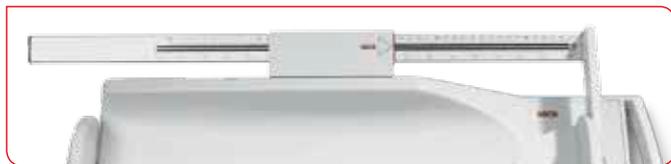

La toise disponible en option permet de peser et mesurer en une seule opération.

**Amortissement automatique pour des résultats fiables.**

Une précision absolue en toutes circonstances : le système seca d'amortissement va de paire avec la technologie de pesée ultrasensible de la seca 334 pour garantir des résultats exacts, même lorsque le bébé gigote.

**Toise optionnelle seca 232.**

La toise seca 232 disponible en option permet d'économiser du temps en transformant le pèse-bébé seca 334 en une station combinée de pesée et de mesure.

**seca 334****Caractéristiques techniques**

- Capacité : 20 kg
- Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g
- Dimensions (LxHxP) : 638 x 105 x 300 mm
- Dimensions de la plateforme (LxHxP) : 595 x 50 x 255 mm
- Poids: 2.8 kg
- Alimentation: piles / bloc secteur en option
- Fonctions : TARE, BMIF / fonction „allaitement“, auto-HOLD, extinction automatique
- En option : toise seca 232, appuie-tête seca 419, adaptateur secteur seca 447, adaptateur d'alimentation seca 400, sacoche de transport seca 428