novità

seca 336 i

Bilancia pesa neonati, EMR ready, con funzione Wi-Fi




- Integrabile nella Cartella Clinica Elettronica, con tecnologia Wi-Fi.
- Piano di misurazione piatto.
- Display a cristalli liquidi altamente leggibile e illuminato.
- Porta USB per collegare il lettore di codici a barre per l'identificazione del paziente.
- Altimetro digitale opzionale seca 234 o altimetro analogico seca 232 n.



seca 336 i:

La misura integrata di peso e altezza previene gli errori.

▶ Quando vuoi sviluppare ulteriormente una bilancia per bambini, devi avere cura di tutto, incluso il contesto in cui deve operare. Come possono essere migliorati i processi di lavoro e come può essere idealmente integrata una bilancia nell'ambiente di lavoro? seca 336i garantisce tutto ciò, grazie alla sua straordinaria qualità e semplicità d'uso. Il vero passo critico di ingresso nel futuro digitale è reso possibile dalla facilità di integrazione della bilancia nella Cartella Clinica Elettronica (EMR).

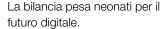

seca 336 i dimostra come i processi di lavoro in pediatria possono essere migliorati e resi più efficienti. La bilancia è dotata di una porta USB a cui è possibile collegare un lettore di codici a barre. Neonati e bambini sono inequivocabilmente identificati e le loro misure sono trasmesse immediatamente in modalità wireless, senza errori, ad un sistema EMR.

Il lettore di codici a barre può essere collegato direttamente

alla bilancia mediante la porta USB, per l'identificazione

opzionale dell'utente e del paziente.

Semplice funzionamento e display di facile lettura.

La spaziosa e piatta superficie di pesata dona al bambino il massimo del comfort e sicurezza. Con il piccolo comodamente posizionato sulla base di pesata, la misura della sua altezza può essere effettuata rapidamente e con precisione. Agevole per pesare anche bambini più grandi, in posizione seduta. La misurazione viene visualizzata sul display a cristalli liquidi illuminato, dove rimane visibile per un massimo di due minuti.



Display a cristalli liquidi illuminato di facile lettura.

Con una rapida pressione di un tasto, peso e altezza sono trasmessi al sistema FMR



Un processo di misurazione veloce è più piacevole per il bambino.

La bilancia seca 336 i è dotata di uno speciale sistema di ammortizzazione del peso che fornisce immediatamente misure esatte anche quando il bambino è irrequieto. Combinata con l'altimetro di misura digitale opzionale seca 234, la bilancia consente di misurare peso e altezza in un solo passaggio. Quando la bilancia è integrata nel sistema EMR, il processo di lavoro viene decisamente migliorato. E' anche disponibile l'altimetro analogico seca 232 n.



L'altimetro di misurazione digitale semplifica il processo di misurazione con il suo ampio display e la funzione di tremissione dei dati

Dati Tecnici

- Portata: 20 kg
- Divisione: 5 g < 10 kg > 10 g
- Dimensioni (LxAxP): 650 x 110 x 308 mm
- Peso: 3,7 kg
- Funzioni: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, auto selezione range di pesata, ammortizzatore, spegnimento automatico, SEND/ PRINT, Conferma Wi-Fi
- Alimentazione: a batterie, alimentatore a rete elettrica opzionale
- Classe di approvazione: (III)
- Porte: USB lettore di codici a barre
- Opzionale: carrelli seca 403 e seca 402, altimetro digitale seca 234, altimetro analogico seca 232 n, borsa per trasporto seca 428



(

Compatibile con tutti i sistemi EMR e prodotti seca EMR ready.