

seca 378

デジタルベビースケール (検定付) ㊦



- 調整可能なダンピング機能を搭載
- 最小表示が2 gの高精度
- 風袋引き機能、ホールド機能
<切替>オートホールド機能、
母乳摂取量表示機能
- 人間工学に基づき、安全性を
追求した広い計量トレイ
- オプションのメジャーロッド
ユニットseca 233を取り付けると
身長と体重の同時測定が可能

seca 378:


じっとしていない乳児の測定？ 問題ありません！

人間工学に基づいたシェイプデザイン、現場の計測業務をいかに安全にかつ簡便化するか、seca 378はそれらのコンセプトを元に開発されました。最小表示2 g (5 kgまで)の高精度ベビースケールでオプションのメジャーロッドユニットseca 233を取り付ける事により体重と身長を同時に測定することができます。感度設定が可能なダンピング機能では、じっとしている事のできない赤ちゃんの体重を的確に感知し表示を固定します。

大きな貝で包み込むような 独特なシェイプ

seca 378はいかに安全に赤ちゃんを計測するかのみを考慮して開発されました。人間工学に基づきデザインされた独特なシェイプは赤ちゃんをまるで大きな貝で包みむような形をしており、最大限の安全性をご提供いたします。

赤ちゃんをやさしい大きな貝で包み込むような独特なシェイプは赤ちゃんの転落を防ぎます

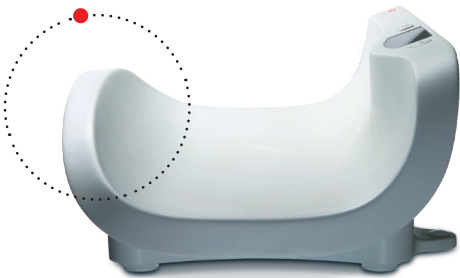

別売オプションのメジャー ロッドユニットseca 233で 体重と身長を同時に測定

計測プロセスを削減するseca 378を使用するその他のメリットは、別売オプションのメジャーロッドユニットseca 233を取り付けることにより体重と身長が同時に測定できることです。



別売オプションのメジャーロッドユニットseca 233を取り付けるとseca 378は体重と身長を同時に測定可能なメジャーリングステーションに早変わりします



風袋引き機能、ホールド機能、 BMIF機能で計測プロセスを 削減

seca 378は日常業務の簡便化を最大限サポートいたします。風袋引き機能は測定時に使用するマットや毛布などの重量をボタン一つで差し引く事ができます。またBMIF機能では赤ちゃんの母乳摂取量を量る事ができます。ホールド機能やオートホールド機能では測定値を固定し赤ちゃんのケアをしっかりとした後で測定値を確認することができます。

seca 378

Technical Data

- 最大計量: 12 kg
- 表示単位: 5 kgまで2 g、5 kg以上5 g
- サイズ (WxHxD): 620 x 190 x 358 mm
- 計量台サイズ (WxHxD): 615 x 130 x 275 mm
- 重量: 3.7 kg
- 電源: 単三乾電池x 6本
- 機能: 風袋引き機能、母乳摂取量表示 (BMIF) 機能、ホールド機能<切替>オートホールド機能、自動電源オフ機能
- 別売オプション:
メジャーロッドユニット seca 233、
ベビースケール専用カート seca 403/seca 402
- 精度等級: 3級