

seca 417

Prancha de medição leve e estável para uso móvel

Mono-folha de produto [**seca 417**



- Operabilidade simples para uso móvel rápido.
- É dobrável para economia de espaço de armazenamento.
- Em materiais de alta qualidade para uma vida útil longa.
- Superfícies lisas para facilitar a limpeza.

seca 417:

Trabalho pesado, feito leve.

A prancha seca 417 é a alternativa móvel para o infantômetro seca 416. O seu mecanismo de dobra e o seu baixo peso fazem à seca 417 compacta e leve para ser transportado com facilidade. Ela é simples de ser usada e, graças a sua superfície lisa, fácil de ser limpa. A durabilidade e longa vida útil são garantidos pelos materiais de alta qualidade.

Operação simples.

Uma dobradiça junta entre si às duas partes da prancha de medição seca 417. Ela tem uma peça de cabeça integrada e um posicionamento de pé separado, que desliza suavemente ao longo da ligeiramente elevada guia de trilho. Para uma medição precisa todo o que o usuário tem a fazer é colocar a cabeça da criança contra a peça de cabeça, esticar os pés e mover o posicionamento de pé até as plantas dos pés.



Os resultados de medição são facilmente lidos da escala ampla.

Resultados fáceis de ler.

O estadiômetro seca 417 é ideal para uso móvel. Durante exames marcados regularmente, o pessoal médico checa as condições nutricionais e o desenvolvimento de infantes e bebês. O processo deve ser rápido, por isso é importante poder ler os resultados facilmente. As marcações vermelhas e a impressão de alta qualidade da prancha não desvanecem, inclusive após o uso intensivo por muitos anos.



O mecanismo de dobra de alta qualidade garante uma vida de serviço longa.


Limpeza rápida.

As superfícies lisas e arredondadas previnem os solavancos e choques durante a medição e facilitam a limpeza. O posicionamento do pé pode ser removido para a acessibilidade das guias de trilho para limpeza. O plástico ABS protege a pele e a escala impressa são impervios a todos os produtos de limpeza e desinfetantes comercialmente disponíveis.

Longa vida de serviços.

A leveza da prancha de medição é igualada pela alta qualidade do mecanismo de dobra, peça de cabeça e o posicionamento do pé. Uma atenção especial é prestada à seleção dos materiais que podem resistir anos de uso intensivo sem perder a sua forma. Uma proteção adicional é fornecida pela sacola seca 412 de transporte, feita de nylon leve, repelente à água.

O posicionamento do pé desliza suave e preciso ao longo das guias de trilho especiais.

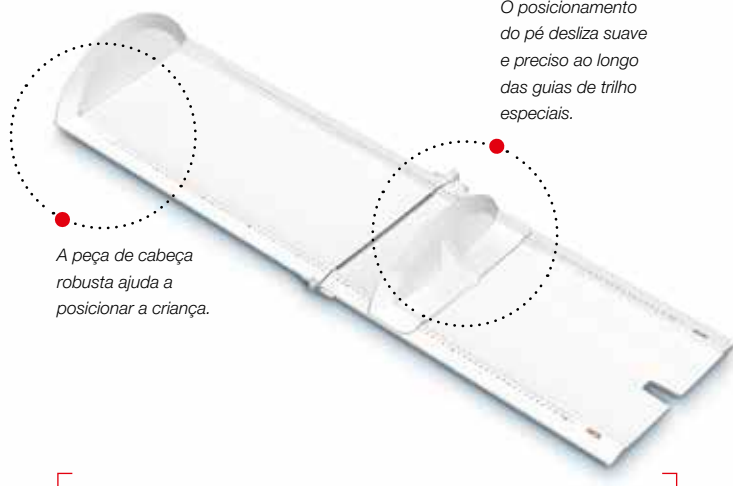

A peça de cabeça robusta ajuda a posicionar a criança.

seca 417

Dados técnicos

- Escala de medição: 10–100 cm
- Graduação: 1 mm
- Dimensões, prancha de medição (LxAxP): aprox. 1.120 x 120 x 310 mm
- Dimensões, dobrada para transporte (LxAxP): aprox. 577 x 115 x 300 mm
- Peso do aparelho: aprox. 1,4 kg