

seca 645

Balança com corrimão multifuncional sem fios 

Integração PEP



- Gradeamento estável provê apoio durante a pesagem.
- Extremamente plano, com plataforma grande.
- De alta capacidade.
- Funcionalidade IMC (Índice de Massa Corporal).

seca 645:

Ótima estabilidade.


O diagnóstico e a terapia de pacientes mais pesados ou com deficiência requerem produtos que satisfazem exigências específicas. A balança com corrimão seca 645 foi especialmente projetada para uso em hospitais, centros de reabilitação, casas de repouso e também em centros de diálise. A seca 645 ajuda a tornar a sua vida médica cotidiana um pouco mais fácil.

Gradeamento estável apoia os pacientes durante a pesagem.

A seca 645 dá para seus usuários uma vantagem única: corrimão de instalação firme proporciona ao paciente um suporte seguro antes, durante e depois da pesagem. Isto significa, claramente, que a tensão no pessoal da enfermagem é consideravelmente aliviada, podendo assim prestar mais atenção aos seus pacientes.

Especialmente plano, com plataforma grande.

A plataforma de anti-deslizamento com uma altura de apenas 55 mm. dá à balança um fácil acesso – até mesmo para pacientes mais velhos e para pacientes de ortopedia. Uma vantagem adicional: uma cadeira pode ser colocada na plataforma de dimensões generosas para os pacientes poderem ser pesados enquanto sentando. Pode ser guardado primeiro o peso da cadeira com a função de pre-TARA e depois ser deduzido automaticamente do peso medido do paciente com a cadeira incluída.

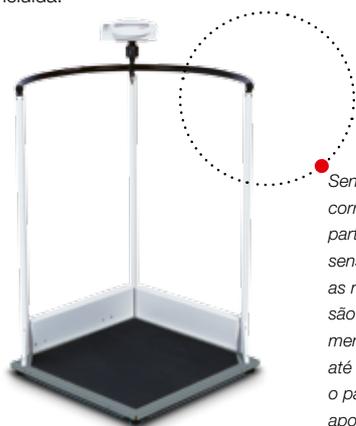

Sendo que o corrimão faz parte da área sensível ao peso, as medições são extremamente precisas até mesmo se o paciente se apoia nele.

Fácil de dobrar e transportar.

Com uma capacidade de 300 kg, a seca 645 é ideal para a pesagem de pacientes mais pesados. Quando acoplado com a haste de medição opcional 223 da seca, também pode ser determinada a altura do paciente durante o processo de pesagem. Com a função IMC pode ser determinar a razão do peso para altura com o toque de um botão, fornecendo assim dados nutricionais objetivos.

Fácil de transportar e não dependente da rede elétrica.

Graças às suas rodas de borracha, a balança com corrimão seca 645 pode ser movida facilmente dentro das instalações até cada paciente. Esta mobilidade é também melhorada pelo fato de que a balança pode ser alimentada pela rede elétrica ou por baterias recarregáveis.



O visor pode ser rodado em qualquer direção.



A vara de medição opcional permite medição e pesagem em um só passo.

seca 645

Dados técnicos

- Capacidade: 300 kg
- Graduação: 100 g < 200 kg > 200 g
- Dimensões (LxAxP): 640 x 1.150 x 660 mm
- Dimensões/plataforma (LxAxP): 600 x 55 x 600 mm
- Peso: 25,4 kg
- Alimentação: Adaptador de energia, baterias recarregáveis
- Funções: TARA, pre-TARA, ESTAB, auto-ESTAB, IMC, Limpar-auto, interruptor para gama de pesagem automática, amortecimento ajustável, desligamento automático, ENVIAR/IMPRIMIR
- Opcional: haste de medição seca 223
- Classe de Aprovação:
- O sistema é compatível com: Impressora sem fios 360° avançada seca 466, impressora sem fios 360° seca 465, adaptador sem fios USB 360° seca 456, software seca analytics 115 e seca PEP flash 101, estadiômetro seca 274 ou seca 264



Transmissão das medições sem erros, sem papéis e sem fios.

Com a tecnologia sem fios seca 360°, a seca 645 pode enviar medições a uma impressora opcional seca 360°. Com as soluções de software de rede seca analytics 115 ou seca PEP flash 101, mais o adaptador sem fios USB seca 456, o seu PC pode receber e analisar medições, enviando-as depois a um sistema de PRONTUÁRIO MÉDICO ELETRÔNICO (PEP). A seca 645 tem integração PEP, pronto para controlar registros digitais de pacientes e todas as demandas futuras. Para mais informação sobre a integração PEP, visite: www.seca.com.