


# seca 665

## EMR ready デジタル 車椅子用スケール (検定付) ㊦

dfcXI Whg\YYh ( gVVU\*65

EMR-integrated

**3年間**  
保証対象製品

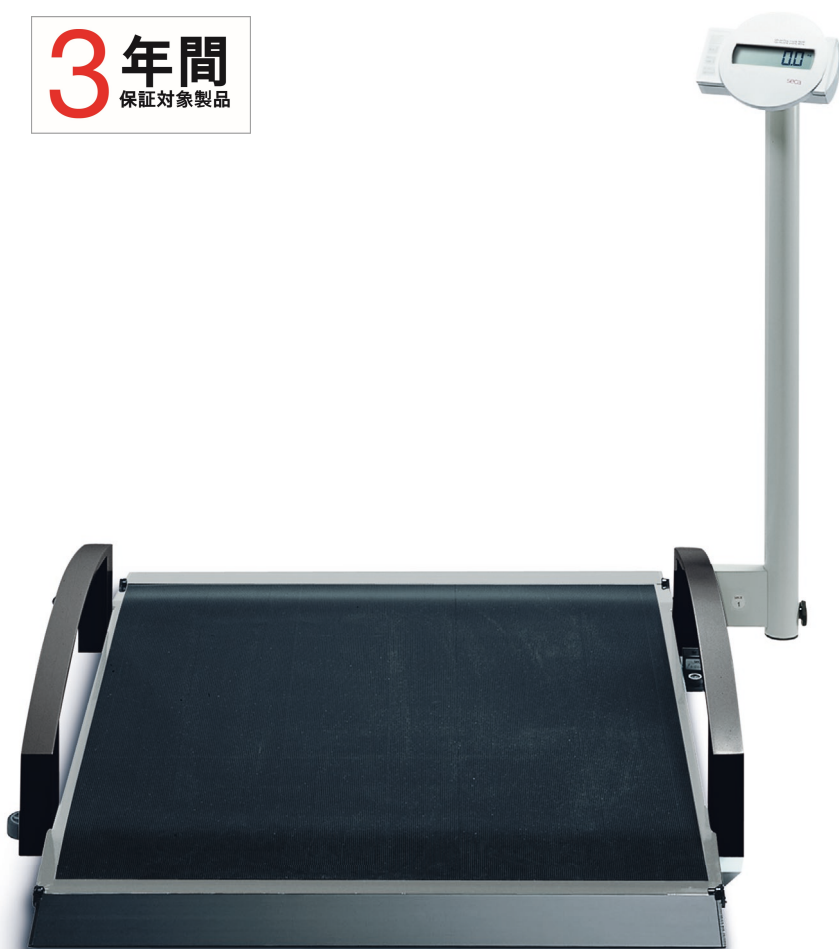

EMR))

- 大きな最大計量
- 広いプラットフォームに  
バリアフリーランプ付き
- 車椅子の計測に便利な  
プリセット風袋機能付き
- 移動をサポートする  
キャスター付き

## seca 665 :

### 測定しやすさを追求

**安** 全性、機能性、そしてデザイン性、seca 665は医療現場での体重測定において必要不可欠なものをすべて兼ね備えています。特に車いす患者やリハビリテーション施設、老人介護施設、病院、透析センターでの測定に着眼点を置き開発、製造されています。seca 665は患者に最大限の安全性と乗りやすさを提供します。



#### 大きな最大計量に乗り降りが簡単なバリアフリーランプ付き

seca 665は最大計量が300kgと非常に大きく電動車椅子などにも対応可能な車椅子用体重計です。大きく広いプラットフォームにはバリアフリーランプが付いており、乗り降りも非常に安全かつ簡単に行うことができます。左右に付いているガイドと滑りにくいラバーマットは車椅子が計量台からの落下を防止します。

#### プリセット風袋機能付き

プリセット風袋機能によりあらかじめ決まった車椅子の重量を登録することができます。これによりボタン一つで登録してある車椅子の重量を差し引いて患者のみの重量を表示することができます。

#### 回転式ディスプレイで収納可能

大型LCDディスプレイは患者からも医療従事者からも非常に読み取りやすくなっています。LCDディスプレイは回転式のため折りたたむことにより収納可能です。

※大型の体重計は移動することを前提に製造されており、移動を頻繁に行うと故障の原因となります。移動用のキャスターはやむを得ず移動が必要な際の移動をサポートするためのものです。あらかじめご了承ください。

#### seca電子カルテ連動ソリューション：仕事の流れを改善する方法

seca 452を使用すると専用サーバーを介して院内のネットワーク上にある全てのseca製品を電子カルテに接続することができます。(別途専用サーバーと接続費用が必要です。) seca電子カルテ連動ソリューションに関するお問い合わせはこちらへ：info@seca.co.jp



ディスプレイは簡単に折りたたむことができ、キャスターで移動が可能です



## seca 665

### テクニカルデータ

- 最大計量：300 kg
- 表示単位：200kgまで100g、200kg以上200g
- サイズ (W×H×D)：1,102 × 912 × 1,150 mm
- 計量台サイズ (W×H×D)：800 × 55 × 965 mm
- 重量：33.4 kg
- 電源：ACアダプター、充電式バッテリー
- 機能：風袋引き機能、プリセット風袋機能、ホールド機能、オートホールド機能、オートレンジ機能、BMI機能、ダンピング機能、送信機能、自動電源オフ機能
- 別売オプション：無線・有線プリンターセット
- 精度等級：3級

システム連携：すべての電子カルテシステム(EMR)そしてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動には別途費用が必要となります。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。