

seca 677 r

EMR ready 手すり付き


デジタル車椅子用スケール

(検定付) ㊦

9A F!]bHY[fUHYX

EMR))

3年間
保証対象製品

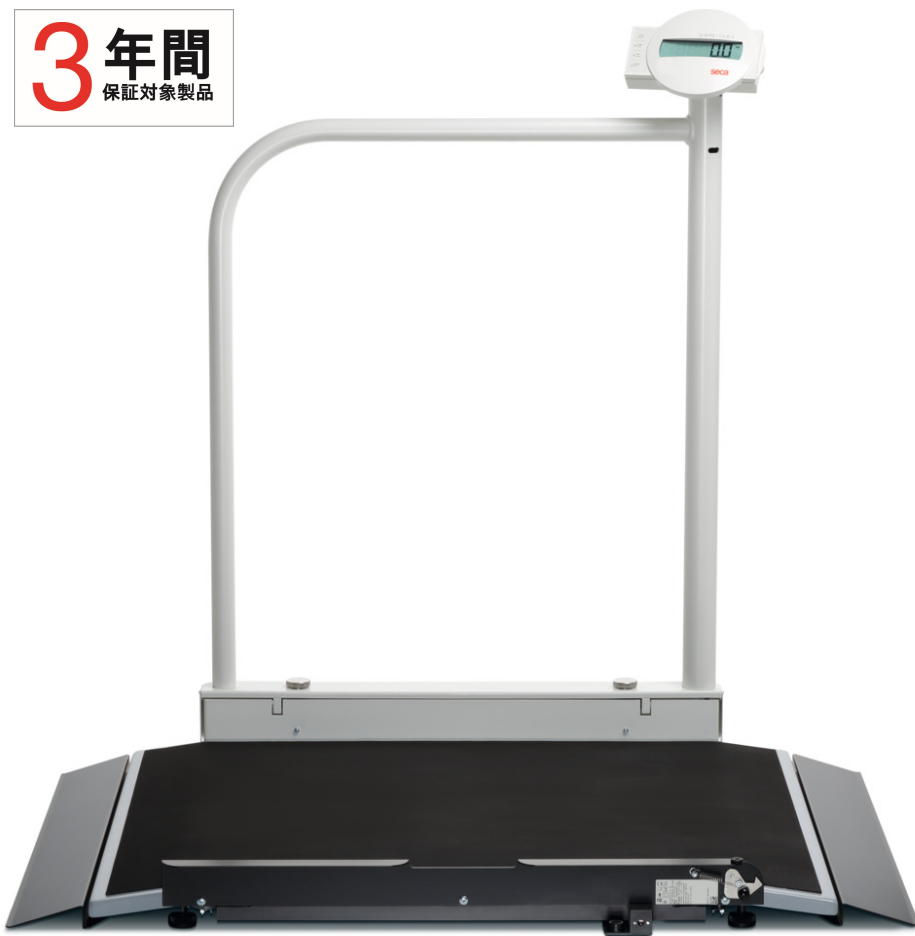

- とても広く低い計量台
- 頑丈で掴まりやすい安定した手すり
- 収納しやすく安定した設計
- プリセット風袋機能付き
- RS232で出力可能 (出力の際にはRS232ケーブル seca 451が必要です)

seca 677 r :

患者の安全を最大限考慮

手すり付きデジタル車椅子用スケール seca 677 r は様々な使用状況を考慮し開発されたコンパクトに収納可能な今までにない画期的な手すり付きの車椅子用体重計です。とても大きく手すりの付いた計量台は車椅子患者や手すりが必要な足元のおぼつかない患者のみならず肥満患者、看護師と一緒に乗っての計測など様々な安全かつ快適な測定を可能にします。病院や老人施設に一台あれば現場のほとんどの要望に応えてくれる体重計です。



product sheet (seca 677 r

大きく広い手すりの付いた計量台

seca 677rの大きく広い計量台は車椅子患者や椅子を置いての測定に適しています。また安定性のある丈夫な手すりは足元のおぼつかない患者の計測を最大限サポートします。

コンパクトで場所をとらず収納可能

車椅子患者などを測定する大型の体重計は使用時以外はとても場所を取ります。seca 677rは手すりを折りたたむことによりコンパクトになり場所をとらずに保管することができます。

※大型の体重計は移動することを前提に製造されており、移動を頻繁に行うと故障の原因となりますので、ご注意ください。移動用のキャスターはやむを得ず移動が必要な際の移動をサポートするためのものですのであらかじめご了承ください。



標準装備のバリアフリーランプで車椅子での測定も簡単です



使いやすさを追求した機能

操作が簡単な回転式で見やすいディスプレイは操作しやすい位置にあり、医師や看護師に最大限の簡便性と最適性を提供します。ホールド機能では患者が体重計から降りた後も重量を表示し続けることができます。風袋引き機能では車椅子や病棟内にある身長計や椅子などの重量を簡単に差し引くことができます。BMI機能では患者の体格指数を簡単に表示します。

EMR



体重計の手すりを折りたたむことができます

seca電子カルテ連動ソリューション：仕事の流れを改善する方法

seca 452を使用すると専用サーバーを介して院内のネットワーク上にある全てのseca製品を電子カルテに接続することができます。(別途専用サーバーと接続費用が必要です。) また、seca 451と一緒にご使用で、RS232で測定値を出力することも可能です。seca電子カルテ連動ソリューションに関するお問い合わせはこちらへ：info@seca.co.jp

seca 677 r

テクニカルデータ

- 最大計量：300 kg
- 表示単位：200 kg まで 100、200 kg 以上 200 g
- サイズ (W×H×D)：920 × 1,120 × 1,150 mm
- 計量台サイズ (W×H×D)：800 × 55 × 965 mm
- 重量：38 kg
- 電源：ACアダプター
- 機能：風袋引き機能、プリセット風袋機能、ホールド機能、オートホールド機能、BMI機能、オートクリア機能、オートレンジ機能、ダンピング機能、送信機能、RS232通信
- 別売オプション：RS232ケーブル seca 451 無線・有線プリンターセット
- 精度等級：3級

システム連携：すべての電子カルテシステム (EMR) そしてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動には別途費用が必要となります。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。