


具有极高称量能力的电子柱秤

seca 704 



new

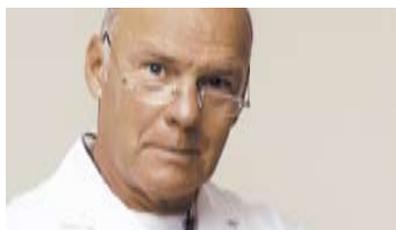

▲ 250 公斤的极高称量能力和极强的稳定性。带有安全底脚的大而稳定的平台。体质指数(BMI)功能。经久耐用的结构

不折不扣的高性能柱秤

确定病人体重是日常医疗卫生保健的一项例行工作。赛康公司现在已开发出704型电子柱秤,适合需快速测定体重的情况下使用。它使得无论测量多大体重的病人都变得很轻松。该柱秤采用紧凑式设计,外形美观大方,即便是超重病人,也可舒适地称量体重。250公斤的极高称量能力和全数字技术,确保最大的称重舒适度。这种柱秤特别适合在普通内科中使用。



极高的称量能力和稳定性

seca 704 型柱秤适合称量大体重病人的体重。除了具有250公斤的高称量能力外,该柱秤还配有一个相当大的低平台。铸铁底座的采用,使该秤具有优异的稳定性。大而低的平台,以及防滑橡胶垫确保使用者能安全、舒适地站立。

利用体质指数(BMI)功能,检查营养状况

当称量病人体重并输入其身高值之后,只需轻触一个按钮,即可快捷测定出其体质指数(BMI)。此数值可提供关于该病人营养状况的可靠信息。利用选配的seca 220 型一体化量高尺,可同时测量病人的身高。



利用去皮和锁定功能,称量体重非常舒适

当病人穿着衣服或使用一个辅助工具时,利用去皮功能,可测定出精确的净重。称重后,锁定功能可将显示屏上体重数值保存三分钟。因此可首先照顾好被测者,然后再记录测量结果。



使用灵活,几乎无需维修

seca 704 型柱秤可灵活使用,这不仅因为其配有机动灵活脚轮,而且因为其可采用电池作为电源,因此无需依赖外接电源。一组电池最多可进行16,000次称重。

技术数据

seca 704 型

最大称量: 250 kg

检定分度值: 100 g

外形尺寸(长 x 高 x 宽): 360 x 930 x 520 mm

平台(长 x 高 x 宽): 350 x 84 x 360 mm

重量: 16 kg

电源: 电池 / 交流电变压器(选配)

准确度等级: III

功能: 去皮、锁定、体质指数(BMI)

选配: seca 220 型量高尺