


seca 874

Báscula de suelo para uso móvil

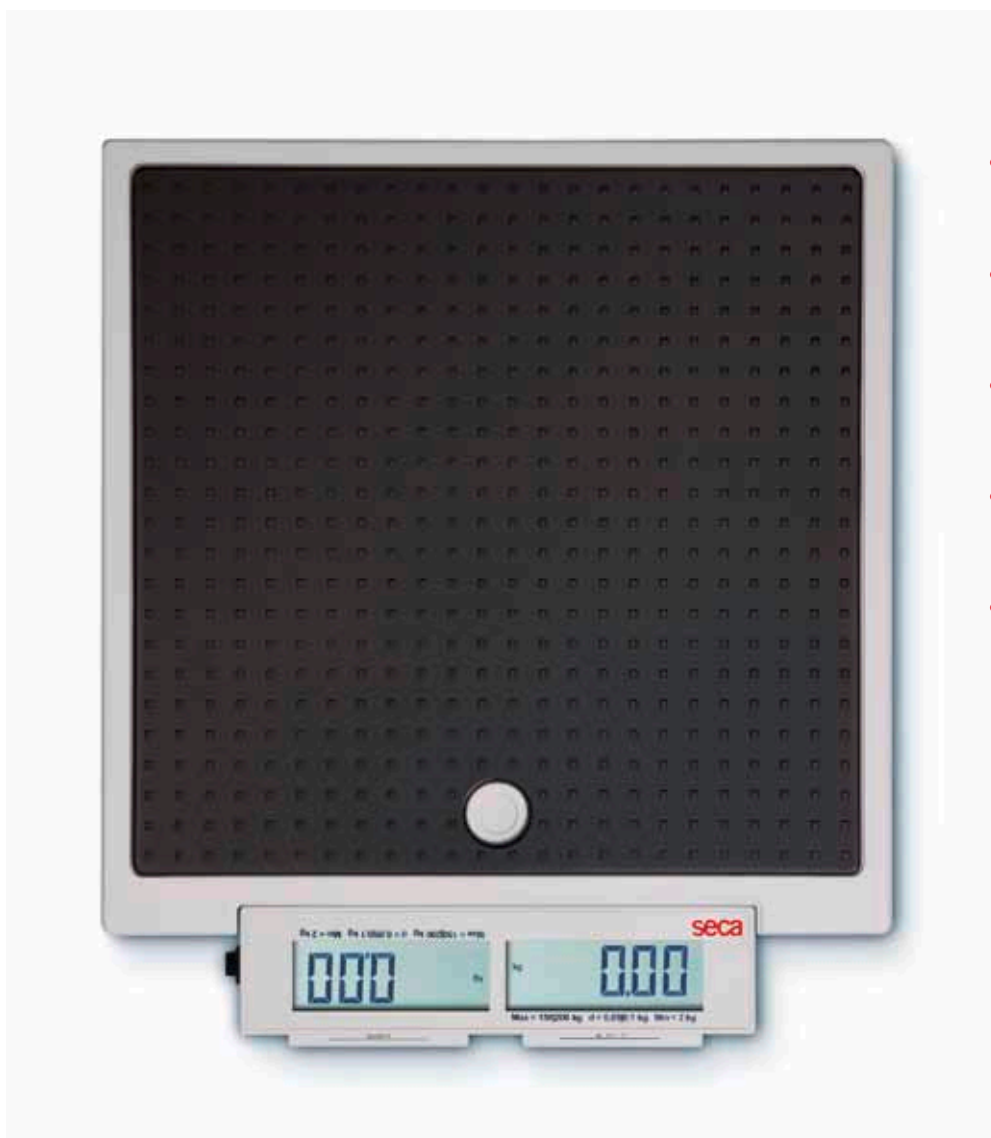

- Con función madre-bebé para pesar niños pequeños.
- Grandes patas niveladores que aseguran su posición.
- Bajo peso y alimentación a pilas para el uso móvil.
- Pantalla doble para leer desde posiciones opuestas.
- Dos teclas pulsadoras para accionar con la punta del pie.

seca 874:

La báscula que piensa en sus usuarios.

La báscula seca 874 ofrece todas las prestaciones que se pueden esperar de una báscula para uso móvil, y mucho más: Resultados siempre precisos en cualquier humedad ambiental. Construcción extraordinariamente robusta, con pilas de funcionamiento prolongado. Y un manejo sumamente sencillo; tan fácil, que sólo necesita la punta de un pie.



Gran estabilidad.

Con sus 4,1 kg solamente, la báscula seca 874 es muy robusta. Por una parte, eso se debe al marco de acero y al denso refuerzo de las partes de material plástico. Además, es sumamente resistente a los impactos, gracias a la utilización de plástico bicomponente ABS y plexiglas®. Estas propiedades permiten el pesaje de niños pequeños y también de personas adultas con un peso de hasta 200 kg. Las patas de nivelación extragrandes afirman su posición sobre cualquier superficie.

De fácil manejo.

Con el fin de evitar la necesidad de agacharse para cada pesaje –por ejemplo, durante algún examen de serie–, la conexión y desconexión de la báscula seca 874 funciona con dos teclas pulsadoras ubicadas en el frente de la plataforma, que simplemente se accionan con la punta del pie. La función madre-hijo ofrece una comodidad adicional, ya que permite pesar a los niños en brazos de sus madres. Y es fácil de transportar, gracias a un asidero integrado y un peso muy bajo de 4,1 kg.

Detalles inteligentes.

Y uno muy llamativo: la doble pantalla permite que el paciente y el personal lean al mismo tiempo los resultados de medición, desde dos posiciones opuestas. Gracias a la protección del conmutador basculante y a una función manual de desconexión que impide el encendido involuntario durante el transporte, el funcionamiento de esta báscula sigue estando asegurado incluso en circunstancias difíciles.

En la pantalla doble, el médico y el paciente pueden leer el resultado al mismo tiempo desde posiciones opuestas.



La construcción plana y la superficie antideslizante facilitan el acceso y aseguran la posición sobre la plataforma.



En la base, grandes patas niveladoras afirman la posición sobre cualquier superficie.



Las dos teclas pulsadoras ubicadas en el frente de la plataforma se accionan fácilmente con el pie.

seca 874

Datos técnicos

- Capacidad: 200 kg / 440 lbs
- División: 50 g < 150 kg > 100g / 0,1 lbs < 330 lbs > 0,2 lbs
- Dimensiones (AxAxP): 321 x 61 x 362 mm / 12,6 x 2,4 x 14,3"
- Dimensiones (AxAxP): 288 x 60 x 280 mm / 11,3 x 2,4 x 11"
- Peso: 4,1 kg / 8,9 lbs
- Alimentación: Batería
- Funciones: Función madre/bébé, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática
- Opcional: Estadiómetro seca 217 en combinación con el elemento adaptador seca 437, bolso de transporte seca 414 (para combinación con tallímetro y elemento adaptador), bolso de transporte seca 421