seca **877**

Balança plataforma para uso móvel



- Função Mamãe-bebê para pesagem de crianças pequenas.
- Plataforma larga com alta estabilidade.
- Fácil de transportar pesa apenas 4,2 kg.
- Funciona com bateria para locais sem tomadas elétricas.



seca 877:

Leve mas estável.

A leve, para uso pesado.

a seca 877 você encontrou a solução certa se você está procurando uma balança leve (apenas 4,2 kg) que é estável, compacta, fácil de limpar e equipado com a função mamãe-bebê.




Leve mas resistente ao impacto.

Plástico ABS e acrílico não são apenas muito robustos, mas também são especialmente leves, uma qualidade que é importante para os interessados em uso móvel da seca 877. Tão importante para o uso externo é a grande plataforma de nivelamento que permite que a balança seja posicionada sem qualquer problema, independentemente da superfície abaixo dela. É fácil pisar na balança, graças à construção plana e plataforma antiderrapante.

Leve, mas com a função mamãe-bebê.

A balança é fácil de operar, mesmo com o visor e elementos de comando integrado na base. Apenas um leve toque do dedo sobre a superfície liga a balança. Bebês e crianças pequenas podem ser facilmente pesadas enquanto estão no colo da mãe. Tudo o que ela tem a fazer é pesar-se separadamente em primeiro lugar. Em seguida a função Mamãe-bebê ajusta a tara do peso.

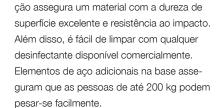

A base é feita de uma mistura de materiais

plásticos de ABS e acrílico. Esta combina-





Plataforma larga para nivelamento seguro.



Visor grande para fácil leitura.



Função "tip-on" para pesagem sem ligar a balança.



Construção plana e superfície antiderrapante para apoio confortável.

seca **877**

Dados Técnicos

- Capacidade: 200 kg
- Divisão: 100g < 150 kg > 200 g
- Dimensões (LxAxP): 321 x 60 x 356 mm
- Peso: aproximadamente 4.2 kg
- Alimentação: baterias
- Funções: Função Mamãe-bebê,
 Liga/ Desliga automático
- Opcional: estadiômetro seca 217
 combinado com o elemento adaptador
 seca 437, estojo de transporte Seca 414
 (para combinação com estadiômetro e
 elemento adaptador) e seca 421
- Classe de Calibração: 🕮